
Titanized Mesh Implants

TiLENE® Plug Set

as well as corresponding TiLENE® variants

de	Gebrauchsanweisung	5
en	Instructions for Use	7
fr	Notice d'utilisation	9
es	Instrucciones de uso	11
pt	Instruções de utilização	13
it	Istruzioni per l'uso	15
nl	Gebruiksaanwijzing	17
sv	Bruksanvisning	19
fi	Käyttöohjeet	21
da	Brugsanvisning	23
tr	Kullanma kılavuzu	25
el	Οδηγίες χρήσεως	27
pl	Instrukcja użytkowania	29
cs	Návod k použití	31
sk	Návod na použitie	33
ru	Инструкции	35
sr	Uputstvo za upotrebu	37



Erklärung der Symbole auf Etikett und Verpackung // Explanation of the symbols on label and packaging // Explication des symboles sur l'étiquette et l'emballage // Explicación de los símbolos en la etiqueta y el envoltorio // Explicação dos símbolos na etiqueta e embalagem // Illustrazione die simboli riportati su etichetta e confezione // Verklaring van de symbolen op het etiket en de verpakking // Förklaring av symboler på etiketten och förpackningen // Etiketin ja pakkauksen symbolien selitys // Forklaring af symbolerne på etiket og emballage // Etiket ve ambalaj üzerindeki sembollerin açıklamaları // Εξήγηση των συμβόλων πάνω στην ετικέτα και τη συσκευασία // Objaśnienie symboli na etykietcie i opakowaniu // Vysvětlivky k symbolům na etiketě a balení // Vysvetlivky symbolov na štítkoch a obaloch // Объяснение символов на этикетке и упаковке // Objašnjenje simbola na etiketi i na pakovanju



Hersteller // Manufacturer // Fabricant // Fabricante // Fabricante // Produttore // Fabrikant // Tillverkare // Valmistaja // Producent // Üretici // κατασκευαστής // Producent // Výrobce // Výrobca // Изготовитель // Produzodač



Bestellnummer // Reference number // N° de commande // Número de referencia para pedidos // Número de encomenda // Numero d'ordine // Bestellnummer // Beställningsnummer // Viitenumero // Bestillingsnummer // Sipariş numarası // Αριθμός καταλόγου // Numer zamówienia // Objednací číslo // Objednávacie číslo // Номер для заказа // Broj narudbe



Chargen-Nummer // Batch number // N° de lot // Número de lote // Número do lote // Numero del lotto // Chargennummer // Satsnummer // Eränumero // Lotnummer // Yük numarası // Κωδικός παρτίδας // Kod partii // Číslo šarže // Číslo šarže // Номер партии // Serijski broj



Gebrauchsanweisung beachten // Follow Instructions for Use // Respecter les instructions du mode d'emploi // Respete las instrucciones // Cumprir as instruções de utilização // Seguire le modalità d'uso // Gebruiksaanwijzing raadplegen // Följ bruksanvisningen // Katso käyttöohje // Følg brugsanvisningen // Kullanım talimatına dikkat // Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης // Zapoznaj się z instrukcją stosowania // Dodržujte návod k použití // Dodržujte návod na použitie // Соблюдайте инструкцию по эксплуатации // Obratiti pažnju na uputstva za upotrebu



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen // Protect from direct sunlight // Protéger contre les rayons directs du soleil // Proteger de rayos directos del sol // Proteger da incidência directa do sol // Proteggere dai raggi solari diretti // Tegen direct zonlicht beschermen // Skydda mot direkt solstrålning // Suojattava suoralta auringonpaisteelta // Beskyttes mod direkte sollys // Doğrudan gelen güneş ışığına karşı koruyunuz // Προστατέψτε το από την άμεση ακτινοβολία ήλιου // Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem // Chraňte před přímými slunečními paprsky // Chráňte pred priamym slnečným žiarením // Защищать от прямых солнечных лучей // Ne izlagati direktnim sunčevim zracima



Trocken aufbewahren // Store in a dry place // A conserver au sec // Manter seco // Guardar num local seco // Conservare in un luogo asciutto // Droog bewaren // Förvara torrt // Säilyttävä kuivassa // Opbevares tørt // Kuru yerde muhafaza ediniz // Διατηρείστε το σε ξηρό μέρος // Przechowywać na sucho // Uchovávejte v suchu // Uchovávejte na suchom mieste // Хранить в сухом месте // Čuvati na suvom



Verwendbar bis // Use by // Date limite d'utilisation // Úsese hasta // Utilizar de preferència antes de // Da usare fino a // Niet te gebruiken na // Används före // Viimeinen käyttöpäivämäärä // Anvendes senest // Kullanna süresi // Ημερομηνία λήξης // Zużyć przed // Použitelné do // Použitelné do // Годен до // Upotrebljivo do



Nicht zur Wiederverwendung // Do not reuse // Produit non réutilisable // No reutizable // Não reutilizável // Non riciclabile // Niet bestemd voor hergebruik // För engångsbruk // Ei saa käyttää uudelleen // Må ikke genanvendes // Tekrar kullanın için değil // Móvo για μία χρήση // Nie używać powtórnie // Ne k opakovanému použití // Nie k opátovnému použitíu // Не пригоден для повторного использования // Nije za ponovnu upotrebu



Nicht erneut sterilisieren // Do not resterilize // Ne pas restériliser // No esterilizar de nuevo // Não esterilizar novamente // Non sterilizzare nuovamente // Niet opnieuw steriliseren // Steriliserar inte en gång till // Ei saa steriloida uudelleen // Steriliser ikke igen // Yeniden sterilize edilemez // Μη το αποστειρώνετε εκ νέου // Nie sterylizować ponownie // Opakovaně nesterilizujte // Znovu nesterilizujte // Не подвергать повторной стерилизации // Ne sterilisati ponovo

STERILE EO

Sterilisation mit Ethylenoxid // Sterilisation with ethylenoxide // Stérilisation à l'oxyde d'éthylène // Esterilización con óxido de etileno // Esterilização com óxido de etileno // Sterilizzazione con ossido di etilene // Sterilisatie met ethyleenoxide // Steriliserad med etylenoxid // Sterilointimenetelmä - etyleenioksidi // Steriliseret med ethylenoxid // Etilenoksit ile sterilizasyon // Αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου // Wyjaławianie tlenkiem etylenu // Sterilizace etylén oxidem // Sterilizácia s etylén oxidom // Стерилизация этиленоксидом // Sterilizacija sa etilenoksidom




Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden // Do not use if the packaging is damaged // Ne pas utiliser en cas d'emballage endommagé // No usar cuando el empaque está dañado // Não utilizar se a embalagem estiver danificada // Non usare se la confezione è danneggiata // Bij beschadigde verpakking, niet gebruiken // Använd inte vid skadad förpackning // Ei saa käyttää, jos pakkaus on vioittunut // Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget // Hasarlı ambalajlardaki malzeme kullanılmamalıdır // Μη το χρησιμοποιείται σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά η συσκευασία // Jeżeli opakowanie jest uszkodzone - nie stosować // Je-li poškozený obal, nepoužívejte // Nepoužívejte pri poškodenom balení // Не использовать, если нарушена упаковка // Ne upotrebljavati ako je pakovanje oštećeno




Diethylhexylphthalat-(DEHP)-frei // Does not contain diethylhexylphthalate (DEHP) // sans Diéthylhexylphthalate (DEHP) // Libre de di(2-ethylhexil)ftalato (DEHP) // isento de dietilhexilftalat (DEHP) // Senza di-2-etilhexilftalato -(DEHP) // Di-ethylhexylftalaat-(DEHP)-vrij // Diethylhexylftalat-(DEHP)-fritt // Ei dietyyliheksyyliftalaattia (DEHP) // Diethylhexylphthalat-(DEHP)-fri // Dietil heksil-ftalat-(DEHP)-içermez // Ελεύθερο διεθυλεξυλ-φθαλτικού εστέρα (DEHP) // Nie zawiera ftalanu dwuoktylu (DEHP) // Volný diethylhexylftalát (DEHP) // Neobsahuje diethylhexylftalát (DEHP) // Не содержит диэтилгексилфталат (DEHP) // Ne sadrži diethylheksilftalat (DEHP)

Gebrauchsanweisung

TiLENE® Plug Set

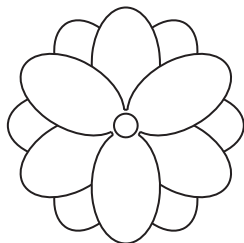

TiLENE® Plug

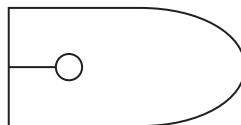

TiLENE® Onlay-Patch

Beschreibung

Großporiges, nicht resorbierbares prothetisches Gewirke aus monofilem Polypropylengarn mit umschließender titanhaltiger Beschichtung. Das Gewirke ist hinsichtlich Reißfestigkeit und Dehnungsverhalten optimal auf die Dynamik des Körpergewebes abgestimmt. Die Netzimplantate sind in verschiedenen Flächengewichten mit definierten Formen und Abmessungen erhältlich.

Das TiLENE® Plug Set besteht aus einem TiLENE® Plug und einem TiLENE® Onlay-Patch.

Diese Gebrauchsanweisung gilt auch für Produktvarianten von TiLENE® Plug Set.

Indikation

Chirurgische Netzimplantate aus titanisiertem Polypropylen-Gewirke dienen der Versorgung von Weichgewebedefekten.

TiLENE® Plug Set dient der Versorgung von Leistenhernien.

Wirkungsweise

Die Implantate dienen der Gewebeerstärkung oder Überbrückung bei Weichgewebedefekten. Durch Anlagerung einer dünnen fibrösen Gewebeschicht, deren Zellen durch die Poren des Gewirkes wachsen, wird das Netzmaterial komplett von körpereigenem Gewebe umhüllt. Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass das Implantat hierbei weich und flexibel bleibt.

Warnhinweise

- ☞ Bei der Versorgung von Weichgewebedefekten mit TiLENE® Netzmanipulanten sind folgende mögliche Komplikationen zu nennen: Serome, Hämatome, Rezidive, Infektionen, viszerale Verwachsungen, Mesh-Migration und Fistelbildung.
- ☞ Obwohl das Netzmaterial von Infekten nicht beeinflusst wird, geht mit der Verwendung von nicht-resorbierbarem Netzmaterial in einer infizierten oder kontaminierten Wunde immer das Risiko einer Fistelbildung und/oder Netzextrusion einher.
- ☞ Im Falle einer Titanallergie ist eine Fremdkörperreaktion, hervorgerufen durch die titanhaltige Umhüllung, vorstellbar.
- ☞ Eine Beeinflussung radiologischer Diagnoseverfahren (Röntgen-, CT-, MRT- und sonographische Untersuchungen) durch die titanhaltige Umhüllung des Kunststoffes ist nicht gegeben.
- ☞ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist oder wenn Sie Zweifel an der Sterilität haben bzw. wenn das Verfalldatum abgelaufen ist.
- ☞ Jedes Produkt ist einzeln verpackt und wird EO-sterilisiert sowie pyrogenfrei geliefert. Es ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wieder verwenden, wieder aufbereiten oder resterilisieren. Eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation von Einmalprodukten kann zu verminderter Leistung oder zum Verlust ihrer Funktionsfähigkeit führen. Durch eine Wiederverwendung von Einmalprodukten kann es zur Exposition mit Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Pilzen kommen.
- ☞ Beschädigte Implantate dürfen nicht verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass scharfe Gegenstände das Netz nicht stärker beschädigen, als es während des Verlaufs der Operation üblich ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bei breiter Dissektion und großen Gewebeablösungen wird empfohlen, die Hämostase sorgfältig zu prüfen und verbleibende Hohlräume möglichst zu vermeiden um die schnelle Integration der Hernien-Verstärkung zu erleichtern.
- Dieses Produkt ist nur von Ärzten einzusetzen, die mit den diesbezüglichen chirurgischen Techniken vertraut sind. Die Implantation erfolgt auf Verantwortung des Chirurgen.
- Um der entzündungsfördernden Wirkung von Fremdpartikeln, wie z.B. Talkum, entgegen zu wirken, sollte das Implantat nur mit ungepuderten Handschuhen angefasst werden.
- Die Implantate sind in einer Doppelverpackung steril verpackt. Die Unversehrtheit der Verpackung ist sorgfältig vor dem Einsatz zu prüfen. Bei beschädigter, offener oder durchfeuchteter Verpackung ist das Implantat keinesfalls zu verwenden. Die innere Verpackung sollte erst vor dem Einsetzen des Implantats geöffnet werden und ausschließlich mit sterilen Handschuhen und sterilen Instrumenten gehandhabt werden.
- Vor Einsatz der TiLENE® Netzmanipulante sollte der Arzt die Größe der Bruchpforte prüfen und auf eine ausreichende Überlappung achten.

Empfohlenes Implantationsverfahren

Im Fall von indirekten Leistenhernien wird der Herniensack nach der Präparation und Ligatur abgetrennt. Für ein optimales Ergebnis wählen Sie die richtige Größe von TiLENE® Plug. Falls erforderlich, kürzen Sie die innere Lage von TiLENE® Plug, wenn bei kleineren Defekten weniger Netzmaterial benötigt wird. Fassen Sie die innere Lage von TiLENE® Plug mit einer sterilen Zange oder Klammer und drücken Sie den Plug vorsichtig durch den inneren Leistenring tief in den präperitonealen Raum. Nachdem Sie den Plug positioniert haben, befestigen Sie die äußere Lage des Plugs mit 2-4 Nähten.

Zusätzlich wird TiLENE® Onlay-Patch auf der Vorderseite der Hinterwand des Leistenkanals platziert. Die Netzöffnung wird um den Samenstrang herum platziert, um eine zusätzlich vorhandene direkte Leistenhernie zu versorgen und/oder das Gewebe zu verstärken, um dem Wiederauftreten einer direkten oder indirekten Leistenhernie vorzubeugen.


Kontraindikation

Für den Einsatz von TiLENE® Netzmanipulanten gelten alle bekannten üblichen Kontraindikationen und Regeln für Weichgewebeanlagen. Hierzu gehören unter anderem:


- Patienten in der Wachstumsphase (die bekannte Ausdehnungsfähigkeit dieser Verstärkung kann sich für das Wachstum von Kindern als unzureichend erweisen).
- Eingriffe an kontaminierter oder entzündeter Stelle.

Instructions for use

TiLENE® Plug Set

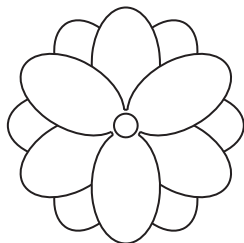

TiLENE® Plug

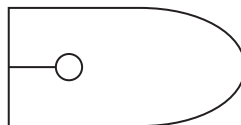

TiLENE® Onlay-Patch

Description

Large-pore, non-absorbable prosthetic mesh made from monofilament polypropylene thread with surrounding titanized coating. The mesh is perfectly coordinated with the dynamics of body tissue in terms of resistance to tearing and elasticity. The mesh implants are available in various basis weights with defined shapes and dimensions.

The TiLENE® Plug Set consists of one TiLENE® Plug and one TiLENE® Onlay-Patch.

These Instructions for Use are also valid for other TiLENE® Plug Set product variants.

Indication

Surgical mesh implants of titanized polypropylene mesh are used in the treatment of soft-tissue defects.

TiLENE® Plug Set is used to repair inguinal hernias.

Mode of action

The purpose of the implants is to strengthen tissue or bridge defects in soft tissue. Adsorption of a thin fibrous tissue layer, whose cells grow through the pores of the mesh fabric, results in the complete enclosure of the mesh material by the patient's own body tissue. Experimental investigations have shown that the implant remains soft and flexible in this context.

Warnings

- ☞ The following complications have been observed in the treatment of soft tissue defects with TiLENE® mesh implants: Seroma, hematoma, recurrence, infections, visceral adhesions, mesh migration and fistula formation.
- ☞ Although the mesh material is not affected by infections, the use of non-resorbable mesh material in an infected or contaminated wound always carries the risk of fistula formation and/or mesh extrusion.
- ☞ A foreign-body reaction triggered by the titanium coating may occur in the case of a titanium allergy.
- ☞ The titanium coating of the synthetic material will not affect radiological diagnostic techniques (X-ray, CT, MRI and ultrasonic examinations).
- ☞ Do not use the product if the packaging is open or damaged or should you have doubts about the sterility or if the use by date has expired.
- ☞ Each product is packed separately and is supplied EO-sterilised and pyrogen-free. It is only to be used once. Do not reuse, reprocess or resterilise. A reuse, reprocessing or resterilisation of disposable products can result in a reduced performance or a loss of their functionality. A reuse of disposable products can result in exposure to pathogens such as viruses, bacteria, fungi or prions.
- ☞ Damaged implants must not be used. Make sure that sharp objects do not affect the mesh beyond the usual clinical application during the operation.

Precautions

- In the case of wide dissection and large-scale tissue excision, it is recommended that hemostasis be carefully checked and any remaining cavity avoided wherever possible, so as to facilitate the rapid integration of hernia strengthening.
- This product should only be used by doctors who are familiar with surgical techniques of this type. The surgeon bears the responsibility for the implantation.
- The implant should only be handled with powder-free gloves to prevent the inflammatory effect of foreign particles such as talc.
- The implants are packaged in a sterile double-wrap packaging. Carefully check that the packaging is undamaged before use. Under no circumstances should the implant be used if the packaging is damaged, open or moist. The inner packaging should only be opened directly before insertion of the implant and should exclusively be handled with sterile gloves and sterile instruments.
- Before using TiLENE® mesh implants, the physician should check the size of the hernial orifice and ensure a sufficient overlap.

Recommended Implantation procedures

In the case of indirect hernias, the hernia sac is separated after preparation and ligature. To ensure optimal results select the right size of TiLENE® Plug. If necessary, trim inner ply of TiLENE® Plug in case less mesh material is required for smaller defects. Grasp the inner ply of TiLENE® Plug with a sterile forceps or clamp and push the plug gently through the internal ring, deep into the preperitoneal space. After positioning of the plug, secure the outer ply of the plug with 2-4 sutures.

Additionally TiLENE® Onlay-Patch is placed on the anterior surface of the posterior wall of the inguinal canal. The opening is placed around the spermatic cord to repair an additionally existing direct hernia and/or to provide strengthening to prevent the recurrence of a direct or indirect hernia.

Contraindications


All established standard contraindications and rules for soft-tissue implants apply to the use of TiLENE® mesh implants.

These include the following:


- Patients in the growth period (the known extensibility of this strengthening may be insufficient for the growth of children).
- Operation on a contaminated or inflamed area.

Notice d'utilisation

TiLENE® Plug Set

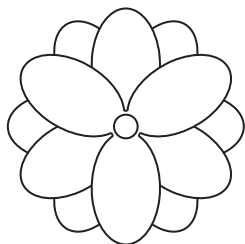

TiLENE® Plug

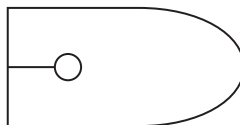

TiLENE® Onlay-Patch

Description

Treillis prothétique à grands pores, non résorbable, en polypropylène monofil enrobé d'un revêtement en titane. La résistance et la dilatation du treillis ont été adaptées de façon optimale à la dynamique des tissus corporels. Les implants de renfort sont commercialisés en différents grammages aux formes et dimensions définies.

Le TiLENE® Plug Set se compose d'un TiLENE® Plug et d'un TiLENE® Onlay-Patch.

Cette notice d'utilisation est valable pour toute autre variante de produit TiLENE® Plug Set.

Indication

Ces implants chirurgicaux de renfort en polypropylène tricoté revêtu de titane sont destinés à la consolidation des tissus mous en cas d'anomalies.

TiLENE® Plug Set est indiqué pour le traitement des hernies inguinales.

Mode d'action

Les implants servent au renfort tissulaire ou assurent une fonction de dérivation en présence d'anomalies des tissus mous. Grâce à l'implantation d'une fine couche tissulaire fibreuse dont les cellules peuvent croître en traversant les pores de la maille, le tricot sera entièrement enveloppé par le tissu endocorporel. Des analyses expérimentales ont pu prouver que l'implant conservait alors sa souplesse et sa flexibilité.

Mises en garde

- ☞ En cas d'utilisation d'un filet prothétique TiLENE® pour le traitement des tissus mous, les complications suivantes sont possibles: séromes, hématomes, récurrences, infections, lésions viscérales, déplacement du filet et formation de fistules.
- ☞ Bien que des infections n'aient aucune influence sur la structure à mailles, l'utilisation d'une structure à mailles non résorbable appliquée sur une blessure infectée ou contaminée s'accompagne toujours du risque de formation de fistules et/ou d'extrusion du tricot.
- ☞ En cas d'allergie au titane, la membrane titane peut provoquer une réaction à corps étranger.
- ☞ La membrane titane entourant la matière plastique n'a aucune influence sur les diverses procédures de diagnostic radiologique (radiographie, tomodensitométrie, IRM, échographie).
- ☞ N'utilisez pas le produit, si l'emballage est ouvert ou endommagé ou si vous avez un doute sur la stérilité ou si la date d'expiration est dépassée.
- ☞ Chaque produit est emballé séparément, stérilisé EO et livré sans pyrogène. Il est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser, ne pas reoprérer ni restériliser. Ne pas réutiliser, ne pas reoprérer ni restériliser. Une réutilisation, reoprération ou restérilisation des produits à usage unique peuvent conduire à une diminution de performance ou à l'annulation de leur bon fonctionnement. Une réutilisation des produits à usage unique peut entraîner une exposition à des agents pathogènes comme les virus, les bactéries, les champignons ou les prions.
- ☞ Les implants endommagés ne doivent pas être utilisés. S'assurer que des objets pointus n'abiment pas les mailles au-delà de l'utilisation clinique habituelle pendant l'opération.

Mesures de précaution

- Il est préférable, en cas de dissection large et de grands détachements de tissus, de contrôler soigneusement l'hémostase et d'éviter absolument de laisser des cavités pour faciliter l'intégration rapide du renfort herniaire.
- Seuls des médecins familiarisés avec les techniques chirurgicales d'insertion de cet implant se chargeront de cette intervention. L'implantation relève de la responsabilité du chirurgien.
- Afin de prévenir les effets inflammatoires provoqués par des particules étrangères telles que le talc, il est conseillé de ne toucher l'implant qu'avec des gants non poudrés.
- Les implants sont conditionnés dans un emballage double stérile. Vérifiez minutieusement l'intégrité de l'emballage avant l'intervention. N'utilisez en aucun cas l'implant si l'emballage est endommagé, ouvert ou humide. N'ouvrez l'emballage intérieur qu'immédiatement avant l'insertion de l'implant et manipulez ce dernier en utilisant exclusivement des gants et des instruments stériles.
- Le médecin devrait contrôler avant la mise en place des filets prothétiques TiLENE® la taille de l'orifice herniaire et s'assurer que le chevauchement sera suffisant.

Procédé d'implantation recommandé

Dans le cas des hernies inguinales, le sac herniaire devra être sectionné à la suite de la préparation et de la ligature. Pour un résultat optimal, choisissez la taille appropriée du TiLENE® Plug. Si nécessaire, raccourcissez la couche intérieure de TiLENE® Plug – lorsqu'il suffit moins de treillis dans le cas de défauts mineurs. Saisissez la couche intérieure de TiLENE® Plug avec une pince stérile et poussez avec précautions le plug au travers de l'anneau inguinal intérieur en profondeur dans la zone préperitonéale. Une fois que vous avez mis en place le plug, fixez la couche extérieure du plug avec 2-4 points.

On placera de plus le TiLENE® Onlay-Patch sur le côté antérieur de la paroi postérieure du canal inguinal. L'ouverture du treillis se place autour du cordon spermatique pour traiter également une éventuelle hernie inguinale directe et/ou pour renforcer le tissu et prévenir ainsi qu'une nouvelle hernie inguinale directe ou indirecte ne se représente.


Contre-indications

L'ensemble des contre-indications et règles habituelles connues valables pour les implants destinés aux tissus mous s'applique à la mise en œuvre de filets prothétiques TiLENE®. Il s'agit entre autres:


- de patients en phase de croissance (la capacité connue de dilatation de ce renforcement peut s'avérer insuffisante à la croissance des enfants).
- d'interventions sur une partie contaminée ou enflammée.

Instrucciones de uso

TiLENE® Plug Set

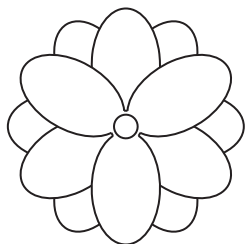

TiLENE® Plug

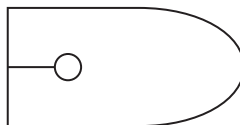

TiLENE® Onlay-Patch

Descripción

Tejido protésico no reabsorbible de monofilamento de polipropileno de poros grandes con recubrimiento de titanio. Gracias a su resistencia al desgarro y su comportamiento de extensión, el tejido se adapta de manera óptima a la dinámica del tejido corporal. Los implantes de malla están disponibles en diferentes gramajes con formas y dimensiones definidas.

El TiLENE® Plug Set se compone de un TiLENE® Plug y uno TiLENE® Onlay-Patch.

Estas instrucciones de uso son también válidas para variantes de producto de TiLENE® Plug Set.

Indicaciones

Los implantes quirúrgicos de malla de polipropileno titanizado sirven para el cuidado de los defectos de los tejidos blandos.

TiLENE® Plug Set sirve para la hernioplastia inguinal.

Modo de funcionamiento

Los implantes sirven para reforzar los tejidos o para la conexión de los mismos en caso de defectos de los tejidos blandos. Al añadir una capa delgada y fibrosa de tejido, cuyas células crecen a través de los poros del tejido, el material de la malla se va cubriendo completamente con el tejido propio del cuerpo. Exploraciones experimentales han demostrado que el implante permanece blando y flexible.

Advertencias

- ❗ El tratamiento de defectos de tejidos blandos con implantes de malla TiLENE® podría conllevar las siguientes complicaciones: seromas, hematomas, recidiva, infecciones, adherencias viscerales, migración de la malla y formación de fistulas.
- ❗ Aunque el material de la malla no se vea afectado por infecciones, se podrá dar el riesgo de que se produzca la aparición de fistulas o la extrusión de la malla, si se usan materiales de malla no resorbibles en una herida infectada o contaminada.
- ❗ En el caso de que se dé una alergia al titanio, es concebible que se produzca una reacción a cuerpos extraños debido al revestimiento de titanio.
- ❗ No se ha dado ninguna influencia sobre procedimientos de diagnóstico radiológicos (exámenes radiológicos, TAC, tomografía de resonancia magnética nuclear y de exámenes ultrasónicos) debido al revestimiento de titanio.
- ❗ No use el producto, cuando el empaque está abierto o dañado, o cuando tenga duda sobre la esterilidad y/o cuando la fecha de vencimiento caducó.
- ❗ Cada producto está empaquetado individualmente y se esteriliza de manera EO y entregado libre de apirogénica. Está destinado solamente para un solo uso. No usar, preparar o reesterilizar de nuevo. Un reuso, nueva preparación o reesterilización de productos únicos puede llevar a una reducción de la potencia, o la pérdida de su funcionalidad. Si se usan de nuevo los productos que se usan una sola vez, pueden suceder exposiciones con enfermedades como virus, bacterias, hongos o priones.
- ❗ Los implantes dañados no se deben usar. Asegurarse que los objetos filosos no afecten la malla fuera de la aplicación usual clínica durante la operación.

Medidas preventivas

- En el caso de una amplia disección y grandes extracciones de tejido, se recomienda revisar cuidadosamente la hemostasia y evitar en lo posible las cavidades con el fin de facilitar la rápida integración del refuerzo de la hernia.
- Este producto deberá ser empleado sólo por médicos, los cuales estarán familiarizados con las técnicas quirúrgicas correspondientes. El injerto correrá bajo la responsabilidad del cirujano.
- Deberá coger el implante sólo con guantes sin empolverar para evitar el efecto inflamatorio provocado por cuerpos extraños, como por ejemplo, talco.
- Los implantes están empaquetados en un paquete doble de manera aséptica. Deberá comprobar detalladamente la integridad del paquete antes proceder a su uso. Si el paquete está dañado, abierto o humedecido, no deberá usar bajo ningún concepto los implantes. No deberá abrir el embalaje interior hasta el momento previo a la colocación del implante y deberá manejarlo exclusivamente con guantes e instrumentos estériles.
- Antes de aplicar las implantes de malla TiLENE® el médico deberá comprobar bajo su responsabilidad el tamaño del orificio herniario prestando atención a que haya una superposición suficiente.

Proceso de implantación recomendado

En caso de unas hernias de ingle indirectas, se separa el saco de hernias después de la preparación y ligadura. Para un resultado óptimo seleccione el tamaño correcto de TiLENE® Plug. En caso requerido, recorte la capa interna de TiLENE® Plug, cuando se requiere menos material de malla en defectos más pequeños. Agarre la capa interna de TiLENE® Plug con una tenaza o pinza esterilizada, y presione el plug con cuidado por el anillo del ingle interno profundamente en el área preperitoneal. Después que posicionó el plug, fije la capa externa del plug con 2-4 suturas.

Adicionalmente se coloca TiLENE® Onlay-Patch sobre la parte delantera de la pared trasera del canal de ingle. La apertura de malla se coloca alrededor del ramal de semen, para suministrar una hernia de ingle adicional y directa existente y/o para reforzar el tejido, y para evitar que vuelva aparecer una hernia de ingle directa o indirecta.


Contraindicaciones

Para el uso del implantes de malla TiLENE® son válidas todas las contraindicaciones y reglas habituales para los implantes de tejidos blandos. Entre las cuales se encuentran, por ejemplo:


- Pacientes que se encuentran en fase de crecimiento (la conocida capacidad de extensión de este refuerzo puede ser insuficiente para el crecimiento de los niños).
- Intervenciones en puntos contaminados o inflamados.

Instruções de Uso

TiLENE® Plug Set

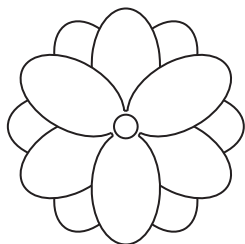

TiLENE® Plug

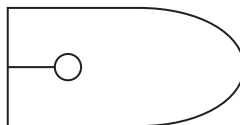

TiLENE® Onlay-Patch

Descrição

Tecido protésico macroporoso não reabsorvível de malha monofilar de propileno com revestimento periférico à base de titânio. No referente à resistência à ruptura e à elasticidade o tecido protésico encontra-se perfeitamente adaptado à dinâmica do tecido fisiológico. Os implantes de rede estão disponíveis em diversas gramagens com formas e medidas definidas.

O TiLENE® Plug Set é composto por um TiLENE® Plug e um TiLENE® Onlay-Patch.

Estas instruções de utilização valem também pelas variantes do produto de TiLENE® Plug Set.

Indicação

Os implantes reticulares cirúrgicos, feitos de tecido de propileno, servem para tratar defeitos dos tecidos moles.

TiLENE® Plug Set é utilizado no tratamento de hérnias inguinais.

Ação

Os implantes servem para fortalecer os tecidos, ou para remediar defeitos dos tecidos moles. Graças à absorção de uma fina camada de tecido fibroso, cujas células vão crescendo através dos poros do tecido, o material da rede é completamente recoberto pelos próprios tecidos do corpo. Exames experimentais mostraram que o implante se mantém mole e flexível.

Avisos

- ❗ Durante o tratamento de lesões dos tecidos moles com TiLENE® implantes reticulares podem ocorrer as seguintes complicações: seromas, hematomas, infecções recidivas, anomalias viscerais, migração de Mesh e fistulização.
- ❗ Embora o material reticular não seja influenciável pelas infecções, ao ser utilizado material reticular não reabsorvível numa ferida infectada ou contaminada há sempre o risco de formação de uma fistula e/ou de uma extrusão da rede.
- ❗ No caso de alergia ao titânio pode ocorrer uma reacção do corpo ao corpo estranho devido ao revestimento de material à base de titânio.
- ❗ Não se confirma a possível influência nos processos de diagnóstico radiológico (exames de raios-X, TAC, ressonâncias magnéticas e ecografias) devido ao revestimento à base de titânio do material sintético.
- ❗ Não utilize o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada ou se tiver dúvidas quanto à esterilidade ou se tiver expirado o prazo de validade.
- ❗ Cada produto está embalado individualmente e é esterilizado EO e é entregue sem pirogênio. Foi concebido para utilização única. Não reutilizar, preparar novamente ou esterilizar de novo. A reutilização, nova preparação ou nova esterilização de produtos de utilização única pode provocar um rendimento reduzido ou a perda da sua capacidade de funcionamento. A reutilização de produtos de utilização única pode levar à exposição com agentes infecciosos como vírus, bactérias, fungos ou príões.
- ❗ Não se devem usar implantes danificados. Certificar-se de que os objectos afiados não afectam a malha para além da aplicação clínica usual durante a operação.

Medidas de precaução

- Recomenda-se uma cuidadosa análise da hemostasia nos casos de dissecação larga e ampla remoção de tecidos, devendo evitar-se tanto quanto possível as restantes cavidades de modo a ver-se facilmente incrementada a rápida integração fisiológica do reforço da hérnia.
- Este produto deve ser aplicado somente por médicos conhecedores das respectivas técnicas cirúrgicas. A responsabilidade pela implantação cabe exclusivamente ao médico.
- Para contrariar a tendência para inflamações causada pela presença de partículas estranhas, tais como o talco, os implantes só devem ser manuseados com luvas sem pó.
- Os implantes são fornecidos em embalagem dupla esterilizada. Antes de utilizar, deve ser cuidadosamente verificado se a embalagem está intacta. No caso da embalagem estar danificada, aberta ou humedecida, de modo nenhum o implante deve ser usado. A embalagem interior deve ser aberta antes da aplicação do implante e manuseada exclusivamente com luvas e instrumentos esterilizados.
- O cirurgião deve examinar a dimensão do orifício herniário e certificar-se duma suficiente sobreposição, antes da aplicação da rede implantes reticulares TiLENE®.

Procedimento de implante recomendado

No caso de hérnias indirectas nas virilhas, o saco de hérnias é separado após a preparação e ligamento. Para um resultado ideal escolha o tamanho correcto do TiLENE® Plug. Se necessário, encurte a camada interior do TiLENE® Plug se for preciso menos material de rede em caso de defeitos mais pequenos. Agarre na camada interior do TiLENE® Plug com uma pinça ou grampo estéril e pressione o Plug cuidadosamente através do anel interior da virilha profundamente no espaço pré-peritoneal. Depois de ter posicionado o Plug, fixe a camada exterior do Plug com 2-4 costuras.

Adicionalmente posiciona-se o TiLENE® Onlay-Patch na parte da frente da parede traseira do canal da virilha. A abertura da rede é posicionada à volta do cordão espermático para tratar uma hérnia de virilha directa, adicionalmente existente, e/ou reforçar o tecido para prevenir o reaparecimento de uma hérnia de virilha directa ou indirecta.


Contra-indicação

Para a utilização dos implantes reticulares TiLENE® aplicam-se todas as contra-indicações e normas habituais válidas geralmente para implantes para partes moles. Destes fazem parte, entre outras, as seguintes contra-indicações:

- Pacientes em fase de crescimento (a capacidade de distensão deste reforço pode não ser suficiente para acompanhar o crescimento da criança).
- Intervenções em locais contaminados ou inflamados.

Istruzioni per l'uso

TiLENE® Plug Set

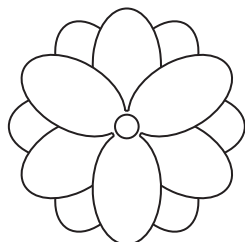

TiLENE® Plug



TiLENE® Onlay-Patch

Descrizione

Maglia protesica a poro grande non riassorbibile in filato polipropilenico monofilamento dotato di rivestimento al Titanio. La maglia si adatta perfettamente alla dinamica del tessuto corporeo sotto il profilo della resistenza allo strappo e del comportamento di dilatazione. Le reti protesiche sono disponibili con diverse grammature, nonché con forme e misure definite.

Il TiLENE® Plug Set è composto da un TiLENE® Plug ed un TiLENE® Onlay-Patch.

Le presenti istruzioni per l'uso valgono anche per le varianti dei prodotti di TiLENE® Plug Set.

Indicazione

Le reti protesiche chirurgiche realizzate in tessuto di polipropilene al titanio servono a curare i difetti dei tessuti molli.

TiLENE® Plug Set è indicato per il trattamento di ernie inguinali.

Azione

Queste protesi servono a rafforzare il tessuto oppure a riparare i difetti dei tessuti molli. Con la formazione di un sottile strato di tessuto fibroso, le cui cellule crescono attraverso i pori del tessuto, il materiale della rete protesica viene avvolto completamente dal tessuto corporeo. Esperimenti in laboratorio hanno dimostrato che la protesi resta morbida e flessibile.

Avvertenze

- ☞ Nel trattamento di difetti del tessuto molle con mesh TiLENE® si ricordano di seguito le possibili complicazioni: seroma, ematomi, recidiva, infezioni, aderenze addominali, migrazione della mesh e fistolizzazione.
- ☞ Sebbene il materiale protesico non venga compromesso dalle infezioni, con l'introduzione di una rete protesica, realizzata in materiale non riassorbibile, in una ferita infetta o contaminata sussiste sempre il rischio di formazione di fistole o di estrusione della rete protesica.
- ☞ In caso di allergia al titanio è presumibile una reazione ai corpi estranei suscitata dall'involucro contenente titanio.
- ☞ Sinora non si è registrata alcuna alterazione della diagnostica radiologica (radiografia, tomografia computerizzata, tomografia a risonanza magnetica nucleare e ultrasuonografia) dovuta all'involucro della plastica contenente titanio.
- ☞ Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata o se dubitate che possa essere sterile e/o se la data di scadenza è stata superata.
- ☞ Ogni prodotto è imballato separatamente e viene sottoposto a sterilizzazione EO e consegnato privo di pirogeni. E' stato ideato come monouso. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Un riutilizzo, ritrattamento o risterilizzazione dei prodotti monouso può provocare una riduzione delle prestazioni o la mancata funzionalità. Un riutilizzo dei prodotti monouso può causare un'esposizione ad agenti patogeni come virus, batteri, funghi o prioni.
- ☞ Non usare gli impianti danneggiati. Accertarsi che gli oggetti affilati non compromettano l'efficacia della rete durante la solita applicazione clinica.

Misure precauzionali

- In presenza di dissezioni piuttosto ampie e del distacco di porzioni grandi di tessuto si raccomanda un controllo accurato dell'emostasi e possibilmente di evitare cavità residue al fine di agevolare la rapida integrazione della protesi erniaria.
- Questo prodotto deve essere utilizzato soltanto da medici esperti nelle relative tecniche chirurgiche. L'impianto viene eseguito sotto la responsabilità del chirurgo.
- Per neutralizzare l'azione infiammatoria dei corpi estranei, quali ad esempio il talco, è consigliabile afferrare la rete protesica con guanti privi di talco.
- Le protesi sono sterilizzate e imballate in una doppia confezione. Verificare accuratamente l'integrità della confezione prima dell'uso. Non usare in alcun caso la rete protesica, qualora la confezione risultasse danneggiata, aperta oppure inumidita. La confezione interna dev'essere aperta solo immediatamente prima dell'introduzione della rete protesica e maneggiata esclusivamente con guanti e strumenti sterili.
- Prima dell'applicazione delle reti mesh TiLENE®, il medico deve verificare le dimensioni dell'orifizio erniario e prestare attenzione ad una corretta sovrapposizione della rete sull'orifizio.

Procedura di impianto consigliata

In caso di ernie inguinali indirette, la sacca dell'ernia viene separata dopo la preparazione e la legatura. Per ottenere risultati ottimali assicurarsi di scegliere la misura giusta di TiLENE® Plug. Se a causa di difetti di entità minore fosse necessario una rete più piccola, accorciare lo strato interno di TiLENE® Plug. Afferrare lo strato interno di TiLENE® Plug, utilizzando una pinza oppure una morsa sterili e premere con cautela - attraverso l'anello inguinale interno - in profondità nella zona preperitoneale. Dopo aver posizionato il plug, fissare lo strato esterno del plug con l'ausilio di 2-4 suture.

Inoltre si procede al posizionamento di TiLENE® Onlay-Patch sul lato anteriore della parete posteriore del canale inguinale. L'apertura della rete viene posizionata intorno al cordone spermico, per curare un'ernia inguinale diretta, eventualmente presente e/o per rinforzare il tessuto, onde evitare la riformazione di ernie inguinali dirette oppure indirette.


Controindicazioni

Nell'impiego di mesh TiLENE® valgono tutte le controindicazioni e le regole sinora note in relazione all'impianto di protesi in tessuti molli. Tra questi citiamo tra l'altro:


- i pazienti in fase di crescita (la nota capacità di estensione di questo rafforzamento può dimostrarsi insufficiente per la crescita dei bambini).
- gli interventi in punti contaminati oppure infiammati.

Gebruiksaanwijzing

TiLENE® Plug Set

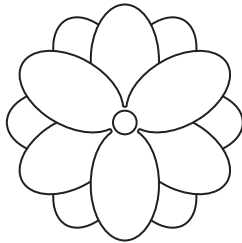

TiLENE® Plug

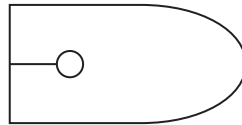

TiLENE® Onlay-Patch

Beschrijving

Niet resorbeerbaar prothetisch weefsel met grote poriën van monofil polypropyleengaren met omhullende titaanhoudende coating. Het weefsel is qua scheurvastheid en rekbaarheid optimaal afgestemd op de dynamiek van het lichaamsweefsel. De netimplantaten zijn in verschillende oppervlaktegewichten met gedefinieerde vormen en afmetingen verkrijgbaar.

Het TiLENE® Plug Set bestaat uit een TiLENE® Plug en een TiLENE® Onlay-Patch.

Deze gebruiksaanwijzing geldt tevens voor productvarianten van TiLENE® Plug Set.

Indicatie

Chirurgische netimplantaten van getitaniseerd polypropyleenbreiwerk worden gebruikt bij de verzorging van defecten van het zachte weefsel.

TiLENE® Plug Set is bestemd voor de verzorging van liesbreuken.

Werking

De implantaten worden gebruikt ter versterking van het weefsel of ter overbrugging van defecten aan het zachte weefsel. Door aanhechting van een dunne fibreuze weefsellaag, waarvan de cellen door de poriën van het breiwerk heen groeien, wordt het materiaal volledig door het lichaamseigen weefsel omhuld. Experimenteel onderzoek heeft uitgewezen dat het implantaat hierbij zijn zachtheid en flexibiliteit behoudt.

Waarschuwingen

- ☞ Bij de verzorging van defecten van zacht weefsel met TiLENE®-netimplantaten dient men rekening te houden met de volgende mogelijke complicaties: seromen, hematomen, recidieven, infecties, viscerale vergroeiingen, mesh-migratie en fistelvorming.
- ☞ Hoewel het netmateriaal niet wordt beïnvloed door infecties, gaat het gebruik van niet-resorbeerbaar netmateriaal in een geïnfecteerde of besmette wond altijd gepaard met het risico van fistelvorming en/of nefaststoting.
- ☞ In gevallen waarbij sprake is van een titaanallergie, is een reactie op lichaamsvreemde stoffen, uitgelokt door de titaanhoudende omhulling, mogelijk.
- ☞ Er zijn geen gevallen bekend waarbij radiologische diagnoseprocedures (röntgen-, CT-, MRI- onderzoek en echoscopie) door de titaanhoudende omhulling van de kunststof nadelig zijn beïnvloed.
- ☞ Gebruik het product niet, als de verpakking geopend of beschadigd is, als u twijfelt aan de steriliteit of als de houdbaarheidsdatum verstreken is.
- ☞ Elk product is afzonderlijk verpakt en wordt EO-gesteriliseerd en pyrogeenvrij geleverd. Het is bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken, opnieuw voorbereiden of opnieuw steriliseren. Het opnieuw gebruiken, opnieuw voorbereiden of opnieuw steriliseren van eenmalige producten kan tot een verminderde prestatie of verlies van de functionaliteit leiden. Het hergebruik van eenmalige producten kan tot een blootstelling aan ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën, schimmels of prionen leiden.
- ☞ Beschadigde implantaten mogen niet worden gebruikt. Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen het gaas niet méér aantasten dan bij de normale klinische toepassing tijdens de operatie.

Voorzorgsmaatregelen

- Bij een brede dissectie en het losmaken van grote weefseldelen wordt aangeraden de hemostase zorgvuldig te controleren en resterende holten indien mogelijk te vermijden om de snelle integratie van de breukversteving te bevorderen.
- Dit product dient uitsluitend door artsen te worden toegepast die vertrouwd zijn met dienovereenkomstige chirurgische technieken. De implantatie geschiedt op verantwoordelijkheid van de chirurg.
- Om de ontstekingsbevorderende werking van lichaamsvreemde stoffen (zoals bv. talk) tegen te gaan, dient het implantaat uitsluitend met ongepoederde handschoenen te worden aangeraakt.
- De implantaten zijn in duoverpakking steriel verpakt. Vóór toepassing van het materiaal dient de onbeschadigde staat van de verpakking zorgvuldig te worden onderzocht. Gebruik het implantaat in geen geval als het in beschadigde, open of vochtige verpakking is aangetroffen. De binnenverpakking mag pas vlak voor toepassing van het implantaat worden geopend, en mag bovendien uitsluitend met steriele handschoenen en steriele instrumenten worden gehanteerd.
- Voor gebruik van de TiLENE®-netimplantaten moet de arts de grootte van de breukpoort controleren en letten op een voldoende overlapping.

Aanbevolen implantatiemethode

In het geval van een indirecte liesbreuk wordt de herniazak na de preparatie en ligatuur afgescheiden. Voor een optimaal resultaat dient u de juiste grootte van TiLENE® Plug te kiezen. Indien nodig kunt u de binnenste laag van TiLENE® Plug verkorten, als bij kleinere defecten minder netmateriaal benodigd wordt. Neem de binnenste laag van TiLENE® Plug met een steriele tang of klem vast en duw de plug voorzichtig door de binnenste liesring tot diep in de preperitoneale ruimte. Nadat u de plug hebt gepositioneerd, bevestigt u de buitenste laag van de plug met 2-4 naden.

Aanvullend wordt TiLENE® Onlay-Patch op de voorzijde van de achterwand van het lieskanaal geplaatst. De netopening wordt om de zaadstreng geplaatst, om een aanvullend bestaande directe liesbreuk te behandelen en/of het weefsel te verstevigen, om te voorkomen dat er opnieuw een directe of indirecte liesbreuk optreedt.


Contra-indicatie

Voor de toepassing van TiLENE®-netimplantaten gelden alle bekende en gebruikelijke contra-indicaties en regels omtrent implantaten voor zacht weefsel. Dit geldt o.a. voor:


- patiënten in de groeifase (de erkende expansiemogelijkheid van deze versterking zou voor de groei van kinderen ontoereikend kunnen zijn).
- ingrepen in besmette of ontstoken plekken.

Bruksanvisning

TiLENE® Plug Set

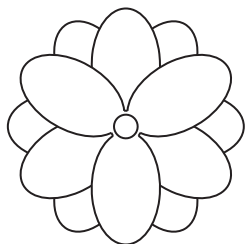

TiLENE® Plug

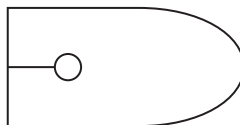

TiLENE® Onlay-Patch

Beskrivning

Storporig, icke resorberbar protestrikå i monofilt polypropylengarn med omslutande titanhaltig beläggning. Trikan är beträffande rivfasthet och töjningsbeteende optimalt avstämd för kroppsvävnaders dynamik. Nätimplantaten kan fås med olika ytvikt och definierade former och dimensioner.

TiLENE® Plug Set består av en TiLENE® Plug och en TiLENE® Onlay-Patch.

Denna bruksanvisning gäller även för andra TiLENE® Plug Set produktvarianter.

Indikation

Kirurgiska nätimplantat av titanbehandlad polypropylentrikå för behandling av mjukvävnadsdefekter.

TiLENE® Plug Set tjänar som stöd åt ljumskbräck.

Verkningssätt

Implantaten används för förstärkning av vävnader eller överbyggande av mjukvävnadsdefekter. Genom pålagring av ett tunt, fibröst vävnadsskikt, vars celler växer genom porerna i trikan, omges nätmaterialet fullständigt av kroppsegen vävnad. Experimentella undersökningar har visat att implantatet härigenom förblir mjukt och böjligt.

Varning

- ☞ Vid stödet av mjukvävnadsdefekter med TiLENE® nätimplantat kan följande komplikationer nämnas: Serom, hematom, återfall, infektioner, inre organs sammanväxningar, nät-migration och fistelbildningar.
- ☞ Även om nätmaterialet inte påverkas av infektioner innebär användningen av icke-resorberbara nätmaterial i ett infekterat eller kontaminerat sår alltid en risk för fistelbildning och/eller avstötning av nätet.
- ☞ Vid titanallergi kan en främmandekroppsreaktion framkallad av den titanhaltiga beläggningen uppträda.
- ☞ Inverkan av plastens titanhaltiga beläggning på radiologiska diagnosmetoder (röntgen-, CT-, MRT- och ultraljudsundersökning) uppträder ej.
- ☞ Använd inte produkten om förpackningen är skadad eller öppnad eller om du tvekar över steriliteten resp. när förfallodatumet har gått ut.
- ☞ Varje produkt är förpackad var för sig och har EO-steriliserats samt levereras pyrogenfri. Den är avsedd för engångsanvändning. Ingen återanvändning, bearbetning eller återsterilisering. Återanvändning, återbearbetning eller återsterilisering av engångsprodukter kan leda till förminskad kapacitet eller förlust av funktionsdugligheten. Genom återanvändning av engångsprodukter kan detta leda till exponering med sjukdomsalstrare som virus, bakterier, vampar eller prioner.
- ☞ Skadade implanteringar får inte användas. Se till att vassa objekt inte påverkar nätet utöver normal klinisk tillämpning under operationen.

Försiktighetsåtgärder

- Vid bred dissektion och stora vävnadsupplösningar rekommenderas att noga kontrollera hemostasen och att undvika de kvarblivande hålrummen så mycket som möjligt, för att underlätta den snabba integrationen av bräckförstärkningen.
- Denna produkt får endast sättas in av läkare, som är förtrogen med den härför lämpliga kirurgiska tekniken. Implantationen sker på kirurgens ansvar.
- För att motverka den inflammationsfrämjande effekten av främmande partiklar, t. ex. talk, skall implantatet endast hanteras med opudrade handskar.
- Implantaten är sterilförpackade i dubbellförpackning. Kontrollera före användning noggrant att förpackningen är oskadad. Om förpackningen är skadad, öppnad eller genomfuktad får implantatet under inga omständigheter användas. Innerförpackningen skall öppnas först före insättande av implantatet och endast hanteras med sterila handskar och sterila instrument.
- Före TiLENE® nätimplantat tas i bruk bör läkaren kontrollera storleken på bräckporten och hänsyn bör tas till tillräcklig överlappning.

Rekommenderat implantationsförfarande


Ifall av indirekta ljumskbräck avskiljs ljumskan efter preparation och ligatur. För ett optimalt resultat välj den riktiga storleken på TiLENE® Plug. Om det är nödvändigt, korta av det inre skiktet av TiLENE® Plug, om det behövs mindre nätmaterial vid mindre defekter. Ta tag i det inre skiktet av TiLENE® Plug med en steril tång eller klammer och tryck försiktigt pluggen genom den inre ljumskringen djupt in i det preperitoneala rummet. Efter att du har positionerat pluggen, sätt fast pluggens yttre kant med 2-4 suturer. Dessutom placeras TiLENE® Onlay-Patch på framsidan av ljumskkanalens bakre vägg. Nätöppningen placeras runt om sädessträngen, för att på plats direkt behandla ett ljumskbräck och/eller förstärka vävnaden, för att förhindra uppkomsten av ett direkt eller indirekt ljumskbräck.

Kontraindikationer


- För insättning av TiLENE® nätimplantat gäller alla kända, vanliga kontraindikationer och regler för mjukvävnadsimplantat. Hit hör bland annat:
- växande patient (förstärkningens kända töjningsförmåga kan visa sig vara otillräcklig för barnets tillväxt).
 - ingrepp i kontaminerad eller inflammerad vävnad.

Käyttöohjeet

TiLENE® Plug Set

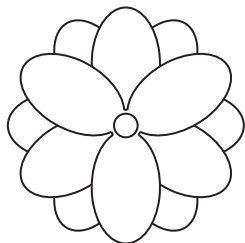

TiLENE® Plug

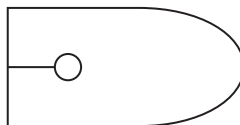

TiLENE® Onlay-Patch

Kuvaus

Suurihuokoinen, sulamaton proteettinen verkko on valmistettu yksisäikeisestä polypropyleenilangasta. Verkon peittää titaanikerros. Repeämättömänä ja taipuisana verkko sopeutuu hyvin kudoksen liikkeisiin. Verkkoi-m-plantteja on saatavissa erilaisin pintapainoin ja eri muotoisina ja kokoisina.

TiLENE® Plug Set sisältää yhden TiLENE® Plug ja yhden TiLENE® Onlay-Patch.

Tämä käyttöopas koskee myös TiLENE® Plug Set tuoteversioita.

Käyttöaiheet

Titaanisoidusta polypropeenikudoksesta valmistettuja kirurgisia verkkoi-m-plantteja käytetään pehmytkudosdefektien hoidossa.

TiLENE® Plug Set on tarkoitettu nivustyrän hoitoon.

Vaikutustapa

Implanttien avulla vahvistetaan kudosta tai korjataan pehmytkudos-defektejä. Ohuen sidekudoksisen kudosteroksen kiinnittymisen kautta verkkomateriaali peittyy täysin kehon omaan kudokseen, koska solut kas-vavat verkon huokosten läpi. Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että im-plantti pysyy tällöin kuitenkin pehmeänä ja joustavana.

Varoitukset

- ☞ **TiLENE®-verkkoiimplantin käytöstä pehmytkudosvaurioiden hoitoon on mainittava seuraavat komplikaatiot: seroomat, hematoomat, uusiutumiset, infektiot, sisäelimiin liittyvät epämuodostumat, verkon siirtymiset sekä fistelien muodostuminen.**
- ☞ **Vaikka infektiot eivät vaikuta verkkomateriaaliin, liittyy resorboitum-attoman verkkomateriaalin käyttöön infektoituneessa tai kontaminoitu-uneessa haavassa aina fistelin muodostumisen ja/tai verkon ulostyöntymisen vaara.**
- ☞ **Titaaniallergian yhteydessä voi esiintyä hylkimisreaktio titaanipitoisen päällysteen vuoksi .**
- ☞ **Synteettisen materiaalin titaanipitoinen päällyste ei vaikuta radiologisiin diagnoosimenetelmiin (röntgen-, CT-, MRT- ja ultraäänitutkimus).**
- ☞ **Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on auki tai vioittunut tai jos epäilet, että tuote ei ole steriili, tai viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut.**
- ☞ **Joka tuote pakataan yksitellen, steriloidaan etyleenioksidilla ja toimitetaan pyrogeenittomana. Kertakäyttöinen. Ei saa käyttää uudelleen, valmistaa uudelleen tai steriloida uudelleen. Kertakäyttötuotteiden käyttäminen, valmistaminen tai sterilointi uudelleen voi alentaa tehoa tai tehdä tuotteesta toimimattoman. Kertakäyttötuotteiden käyttäminen uudelleen voi altistaa sairauden aiheuttajille, kuten viruksille, bakteereille, sienille tai prioneille.**
- ☞ **Vahingoittuneita implantteja ei saa käyttää. Varmista, että terävät esineet eivät vaikuta verkkoon muuten kuin asetettaessa tavalliseen tapaan kliinisesti toimenpiteen aikana.**

Varotoimenpiteet

- Tyrävhivesteen nopeamman integraation helpottamiseksi suositellaan laajoissa dissektioissa ja suuria kudosalueita poistettaessa, että hemostaasi varmistetaan huolellisesti ja pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään onteloiden muodostumista.
- Verkko tulee asettaa paikoilleen vain sellaisten lääkärin toimesta, jotka ovat perehtyneet asiaankuuluviin kirurgisiin menetelmiin. Implantaatio tapahtuu kirurgin vastuulla.
- Vierasesineiden, kuten esim. talkin, tulehdusta edistävien vaikutusten välttämiseksi tulee implanttia käsitellä vain puuteriimattomien käsin.
- Implantit on pakattu steriilisti kaksoispakkaukseen. Pakkauksen vahingoittumattomuus on tarkastettava huolellisesti ennen käyttöä. Mikäli pakkaus on vaurioitunut, auennut tai kostunut, ei implanttia saa missään tapauksessa käyttää. Sisempi pakkaus avataan vasta ennen implantin asettamista paikoilleen ja sitä tulee käsitellä yksinomaan steriilein käsin ja steriilein välinein.
- Ennen TiLENE®-verkkoiimplantin käyttöä lääkärin on tarkistettava tyräportin koko ja varmistettava, että verkko peittää portin riittävästi.

Suositeltu implanttimenetelmä

Epäsuoran nivustyrän tapauksessa tyräpussi irrotetaan preparoinnin ja ligatuuran jälkeen. Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi on valittava oikean kokoinen TiLENE® Plug. Tarvittaessa on lyhennettävä TiLENE® Plug-verkkoiimplantaatin sisäkerrosta, jos pienemmistä vammoissa tarvitaan vähemmän verkkomateriaalia. Ottakaa TiLENE® Plug-verkkoiimplantaatin sisäkerroksesta kiinni steriileillä pihdeillä ja painakaa plug varovasti sisemmän nivusrenkaan läpi preperitoneaaliseen alueelle. Kun olette sijoittaneet plugin, kiinnittäkää sen ulompi kerros 2-4 ompeleella.

Lisäksi TiLENE® Onlay-Patch sijoitetaan nivuskanavan takaseinämän etupuolelle. Verkon aukko sijoitetaan siemennuoran ympärille, jotta lisäksi hoidetaan mahdollinen suora nivustyrä ja/tai kudosta tuetaan suoran tai epäsuoran nivustyrän uudelleen syntymisen välttämiseksi.


Vasta-aiheet

TiLENE®-verkkoiimplantteja tuotteiden käyttöön pätevät kaikki pehmytkudosimplantteja koskevat tunnetut ja yleiset vasta-aiheet ja ohjeet. Näihin kuuluvat mm.:


- kasvuvaiheessa olevat potilaat (vahivesteen tunnettu venymiskyky saattaa osoittautua riittämättömäksi lapsen kasvaessa).
- toimenpiteet kontaminoituneella tai tulehtuneella alueella.

Brugsanvisning

TiLENE® Plug Set

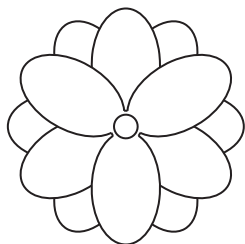

TiLENE® Plug

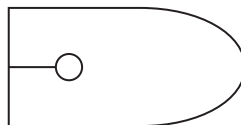

TiLENE® Onlay-Patch

Beskrivelse

Et storporet, ikke-resorberbart protetisk væv strikket af polypropylen-monofilamenter med en heldækkende titanholdig coating. Vævet er, med hensyn til rivstyrke og udvidelsesforhold, optimalt tilpasset kropsvævs dynamik. Net-implantaterne kan leveres med forskellig fladevægt i definerede former og mål.

TiLENE® Plug Set'et består af en TiLENE® Plug og en TiLENE® Onlay-Patch.

Denne brugsanvisning gælder også for produktvarianter af TiLENE® Plug Set.

Indikation

Kirurgiske net-implantater af et væv strikket af titaniseret polypropylen bruges til behandling af defekter i bløddele.

TiLENE® Plug Set tjener behandling af inguinalhernia.

Virkemåde

Implantaterne fungerer som forstærkning af vævet eller som overgang ved defekter på bløddele. Net-materialet lægges på et tyndt, fibroøst lag væv, hvis celler vokser gennem materialets porer, så net-materialet bliver totalt omsluttet af kroppens eget væv. Eksperimentelle undersøgelser har vist, at implantatet forbliver blødt og fleksibelt.

Advarsler

- ☞ Ved behandling af blødvævsdefekter af TiLENE® Netzimplantater, kan nævnes følgende mulige komplikationer: Serom, hæmatom, recidiv, infektioner, viscerale misdannelser, mesh-migration og fisteldannelse.
- ☞ Selv om infektioner ikke influerer på net-materialet, er anvendelse af ikke-resorberbart net-materiale i et inficeret eller kontamineret sår altid forbundet med risiko for fisteldannelse og/eller net-ekstrusion.
- ☞ I tilfælde af titanallergi er en fremmedlegemereaktion, fremkaldt af den titanholdige coating, sandsynlig.
- ☞ Den titanholdige coating har ingen indflydelse på radiologiske diagnosemetoder (røntgen-, CT-, MRT- og ultralydsundersøgelser).
- ☞ Brug ikke produktet, hvis emballagen er åbnet eller beskadiget, eller hvis der er tvivl om steriliteten eller den sidste anvendelsesdato er udløbet.
- ☞ Hvert produkt er emballeret enkeltvist og leveres EO-steriliseret samt pyrogenfrit. Er beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges, oparbejdes eller resteriliseres. Genbrug, oparbejdning eller resterilisering af engangsprodukter kan føre til reduceret ydelse eller til funktionssvigt. Genbrug af engangsprodukter kan føre til eksponering med sygdomsfremkaldende stoffer som vira, bakterier, svampe eller prioner.
- ☞ Brug ikke beskadigede implantater. Sørg for at skarpe objekter ikke påvirker vævet udover den sædvanlige kliniske applikation under operationen.

Forholdsregler

- Ved bred dissektion og stor vævsløsning anbefales det, at kontrollere hæmostasen omhyggeligt og så vidt muligt undgå resterende hulrum, for at lette en hurtig integration af hernia-forstærkningen.
- Dette produkt må kun anvendes af læger, der er fortrolige med de relevante kirurgiske teknikker. Implantationen sker på kirurgens ansvar.
- For at modvirke den betændelsesfremmende virkning fra fremmede partikler som f.eks. talkum bør implantatet kun berøres med upudrede handsker.
- Implantaterne er emballeret sterilt i en dobbeltpakning. Før brugen skal det kontrolleres, at emballagen er ubeskadiget. Hvis emballagen er beskadiget, åbnet eller gennemvædet, må implantatet under ingen omstændigheder anvendes. Den indvendige emballage bør først åbnes, når implantatet skal sættes i, og bør kun berøres med sterile handsker og sterile instrumenter.
- Før anvendelse af TiLENE® Netzimplantater skal lægen kontrollere størrelsen af brudporten og sørge for en tilstrækkelig overlapning.

Anbefalet implantationsmetode

I tilfælde af indirekte lyskehernier fjernes herniesækken efter præparation og ligatur. For at opnå et optimalt resultat skal TiLENE® Plug vælges i den rigtige størrelse. Om nødvendigt, afkortes det indvendige lag i TiLENE® Plug, hvis der ved mindre defekter er brug for mindre netmateriale. Tag fat i det indre lag i TiLENE® Plug med en steril tang eller klemme og tryk forsigtigt plug'en gennem den indvendige lyskering dybt ind i det præperitoneale rum. Når plug'en er placeret, fastgøres plug'ens yderste lag med 2-4 tråde. Yderligere placeres TiLENE® Onlay-Patch på forsiden af lyskekanalens bagvæg. Netåbningen placeres rundt om sædstrengen, sådan at et yderligere eksisterende direkte lyskehernie behandles og/eller vævet forstærkes for at forebygge en tilbagevendende af et direkte eller indirekte lyskehernie.


Kontraindikation

Om brugen af TiLENE® Netzimplantater gælder alle kendte normale kontraindikationer og regler for bløddelsimplantater. Disse omfatter blandt andet:


- Patienter i vækstfasen (den kendte udvidelsesevne hos denne forstærkning kan vise sig utilstrækkelig for børns vækst).
- Indgreb på kontamineret eller betændt sted.

Kullanma Talimatı

TiLENE® Plug Set

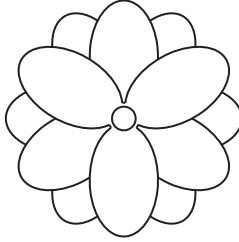

TiLENE® Plug

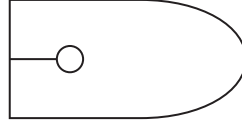

TiLENE® Onlay-Patch

Tanımı

Tamamen titanyum kaplamalı polipropilen monofil liften oluşan büyük gözenekli, emmici olmayan protetik doku. Doku, yırtılma mukavemeti ve uzama özelliği bakımından, vücut dokusunun dinamiğine uygun olacak şekilde yapılandırılmıştır. Ağ emplantları tarif edilen şekil ve boyutlarda değişik yüzey ağırlıklarında temin edilebilir.

TiLENE® Plug Set bir TiLENE® Plug ve bir TiLENE® Onlay-Patch 'tan oluşmaktadır.

Bu kullanım talimatnamesi TiLENE® Plug Set ürün varyasyonu içinde geçerlidir.

Endikasyon

Titanlaştırılmış polipropilen dokusundan olan şirürji ağ emplantların görevi, yumuşak doku arızalarını tedavi etmektir.

TiLENE® Plug Set, kasık hernilerinin tedavisi için uygundur.

Etki etme şekli

Emplantların görevi, dokunun sağlamlaştırılması veya yumuşak doku arızalarını örtmektir. Hücreleri kumaş dokusunun gözeneklerinin içinden büyüyen ince lifli doku tabakasının yerleşmesi ile, ağ malzemesi tamamen vücuda ait doku tarafından sarılmaktadır. Deneysel araştırmalar, emplantın bu konuda yumuşak ve esnek kaldığını göstermiştir.

Uyarılar

- Yumuşak doku bozukluklarının TiLENE® mesh implantları ile tedavisi sırasında, aşağıdaki muhtemel komplikasyonlar mümkündür: Seroma, hematoma, residif, enfeksiyonlar, visceral büyümeler, mesh migrasyonu ve fistül oluşumu.
- Ağ malzemesinin bulaşmalardan etkilenmemesine rağmen, bulaşmış veya kirlenmiş bir yara içinde emmeyen ağ malzemesinin kullanılması ile sürekli fistül oluşumu ve/veya ağın itip çıkması riski vardır.
- Titan alerjisi durumunda, titan içeren kılıftan ortaya çıkan bir yabancı cisim reaksiyonu düşünülebilir.
- Plastiğin titan içeren kılıfından radyolojik teşhis yöntemleri (röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, sonografik muayene) etkilenmemektedir.
- Ambalajı açık veya hasarlı ise veya sterilize konusunda tereddüdünüz varsa, ya da son kullanım tarihi geçti ise ürünü kullanmayınız.
- Her ürün münferit olarak ambalajlanır ve EO olarak sterilize edilerek pirojenizsiz biçimde teslim edilir. Ürün bir kez kullanım için tasarlanmıştır. Yeniden kullanılmamalı, hazırlanmamalı veya yeniden sterilize edilmemelidir. Bir kullanımlık ürünlerin yeniden kullanımı, yeniden hazırlanması veya yeniden sterilize edilmesi veriminin düşmesine veya işlevselliğinin azalmasına neden olur. Bir kullanımlık ürünün yeniden kullanımı virüs, bakteri, mantar ve priyon gibi hastalık ajanlarına maruz kalma sonucunu doğurabilir.
- Hasarlı ürünler kullanılamaz. Ameliyat sırasındaki genel klinik uygulamalarda sivri uçlu nesnelerin ürüne zarar vermesini önleyiniz.

Güvenlik Tedbirleri

- Geniş diseksiyonda ve büyük doku çözümlerinde, hemostasin dikkatle kontrol edilmesi ve herni güçlendirmesinin hızlı entegrasyonunu kolaylaştırmak için kalan boşluk yerlerinin önlenmesi tavsiye edilir.
- Bu ürün, bununla ilgili şirürji teknikleri bilen doktorlar tarafından kullanılmalıdır. Emplantasyon, cerrahın sorumluluğu altında gerçekleşmektedir.
- Örn. talk gibi yabancı parçacıkların iltihabı teşvik edici etkisini önlemek için, emplant sadece pudralanmamış eldivenler ile doku-nulmalıdır.
- Emplantlar bir çift ambalaj içinde sterilize edilmiş bir şekilde paketlenmiştir. Kullanmadan önce ambalajın sağlam olduğu itinalı bir şekilde kontrol edilmelidir. Ambalajın hasarlı, açık veya nemli olması durumunda, emplant kesinlikle kullanılmamalıdır. İç ambalaj, emplantı yerleştirmeden önce açılmalıdır ve yalnız sterilize eldiven ve sterilize aletler ile uygulanmalıdır.
- TiLENE® mesh implantları kullanmadan önce doktorun yırtık boyutunu ve yeteri derecede üst üste binme olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.

Tavsiye edilen implantasyon işlemleri

Dolaylı kasık dejenerasyonunda dejeneré bölge parçalama ve damar bağlama yöntemiyle alınır. En iyi sonuç için doğru TiLENE® Plug ebadını seçiniz. Eğer gerekirse TiLENE® Plug'un iç konumunu küçültünüz, şayet küçük kusurlarda daha az ağ maddesine ihtiyaç varsa. TiLENE® Plug'un iç konumunu steril bir pense ile tutunuz ve Plug'u dikkatlice iç kasık halkasından ön karın boşluğuna doğru ittiniriz. Plug'u yerleştirdikten sonra Plug'un dış konumunu 2-4 dikişle sabitleyiniz. TiLENE® Onlay-Patch ayrıca kasık kanalı arka duvarının ön tarafına yerleştirilir. Ayrıca mevcut bulunan doğrudan kasık dejenerasyonunun tedavisi ve/veya dokunun güçlendirilmesi için, dolaylı veya doğrudan bir kasık dejenerasyonunu önlemek için ağ açıklığı er bezi hattının etrafına yerleştirilir.


Kontrendikasyonlar

TiLENE® mesh implantları'nın kullanımı için yumuşak doku implantları için geçerli bütün alışılagelmiş karşı endikasyonlar ve kural-lar geçerlidir. Başkalarının yanısıra bunlara aşağıdakiler sayılmaktadır:


- Gelişme çağındaki hastalar (bu güçlendirmenin bilinen esneme yeteneği çocukların gelişmesi için yetersiz olabilir).
- Kirlenmiş veya iltihaplı yerlere müdahaleler.

Οδηγίες χρήσεως

TiLENE® Plug Set

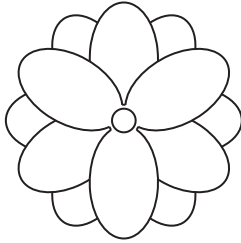

TiLENE® Plug

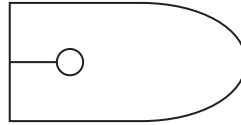

TiLENE® Onlay-Patch

Περιγραφή

Μη αφομοιώσιμο προσθετικό πλέγμα με μεγάλους πόρους κατασκευασμένο από μονόκλωνο σπείραμα πολυπροπυλενίου με περιβάλλουσα τιτανίου επίστρωση. Το πλέγμα είναι τέλεια συντονισμένο με τα δυναμικά των ιστών του σώματος σε σχέση με τη ρήξη και την ελαστικότητα. Τα εμφυτεύματα διατίθενται σε διάφορα βάρη ανά μονάδα επιφάνειας, με προκαθορισμένα σχήματα και διαστάσεις. Το TiLENE® Plug Set αποτελείται από ένα TiLENE® Plug και ένα TiLENE® Onlay-Patch. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν και για παραλλαγές του TiLENE® Plug Set.

Ένδειξη

Τα δικτυωτά χειρουργικά εμφυτεύματα από πλέγμα πολυπροπυλενίου με επίστρωση τιτανίου χρησιμοποιούνται για τη θεραπευτική αγωγή βλαβών των μαλακών ιστών. Ο TiLENE® Plug Set χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης.

Τρόπος δράσης

Τα εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση ή την αντιμετώπιση βλαβών των μαλακών ιστών. Το δικτυωτό υλικό «παγιδεύει» ένα λεπτό, ινώδες στρώμα ιστού, του οποίου τα κύτταρα αναπτύσσονται μέσω των πόρων του πλέγματος. Έτσι το υλικό περικλείεται εντελώς από ιστό του ίδιου του σώματος. Πειραματικοί έλεγχοι έδειξαν πως στην περίπτωση αυτή το εμφύτευμα παραμένει μαλακό και ελαστικό.

Προειδοποιητικές υποδείξεις

- ✚ Έχουν παρατηρηθεί οι ακόλουθες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της θεραπείας των ατελειών μαλακών ιστών με εμφυτεύματα πλέγματος TiLENE®: Ορογόνωμα, αιμάτωμα, υποτροπή, μολύνσεις, κοιλιακές συμφύσεις, μετανάστευση πλέγματος και δημιουργία συριγγίων.
- ✚ Παρόλο που το δικτυωτό υλικό δεν επηρεάζεται από λοιμώξεις, η χρήση μη απορροφήσιμων δικτυωτών υλικών σε μια μολυσμένη πληγή εμπεριέχει πάντα τον κίνδυνο δημιουργίας συριγγίου και/ή απόθλησης του δικτύου.
- ✚ Στην περίπτωση αλλεργίας στο τιτάνιο δεν αποκλείεται ο οργανισμός να εμφανίσει αντίδραση ξένου σώματος, προκαλούμενη από την επικάλυψη τιτανίου.
- ✚ Η επικάλυψη τιτανίου του συνθετικού υλικού δεν επηρεάζει ενδεχόμενες ραδιολογικές διαγνωστικές διαδικασίες (ακτινολογική εξέταση, ηλεκτρονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και υπέρηχο).
- ✚ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχετε ενδοισμούς για τη στεριότητα ή εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
- ✚ Κάθε προϊόν είναι ατομικά συσκευασμένο και διατίθεται αποστειρωμένο καθώς και σε μη πυρογενή συσκευασία. Προορίζεται για την μοναδική χρήση. Μη το επαναχρησιμοποιείτε, μη το επαναπεξεργάζεστε ή μη το επαναποστειώσετε. Μία επαναχρησιμοποίηση, επαναπεξεργασία ή επαναποστείρωση μπορεί στα προϊόντα μίας χρήσης να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση ή στην απώλεια της λειτουργικής ικανότητάς τους. Με μία επαναχρησιμοποίηση προϊόντων μίας χρήσης μπορεί να εκτεθούν παθογόνοι μικροοργανισμοί όπως ιοί, βακτηρίδια ή μύκητες.
- ✚ Η χρησιμοποίηση εμφυτευμάτων που έχουν υποστεί ζημιά δεν επιτρέπεται. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι μυτερά αντικείμενα δεν προκαλούν μεγαλύτερες ζημιές στο δίκτυο απ ότι γίνεται συνήθως στην πορεία μίας εγχείρησης.

Προληπτικά μέτρα

- Σε περίπτωση ευρείας έκτασης διατομής και μεγάλου εύρους εκτομής, συνιστάται ο προσεκτικός έλεγχος της αιμόστασης και η αποφυγή κάθε παραμένουσας κοιλότητας, ει δυνατόν, ώστε να διευκολυνθεί η γρήγορη ενσωμάτωση της ενδυνάμωσης της κήλης.
- Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από γιατρούς που γνωρίζουν τις αντίστοιχες χειρουργικές τεχνικές. Η εμφύτευση λαμβάνει χώρα με ευθύνη του χειρουργού.
- Για να περιοριστεί ο κίνδυνος λοίμωξης μέσω ξένων σωμάτων, π.χ. ταλκ, ο χειρουργός πρέπει να αγγίζει το εμφύτευμα μόνο με χειρουργικά γάντια που δε διαθέτουν επικάλυψη πούδρας.
- Τα εμφυτεύματα διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία 2 τμχ. Πριν από τη χρήση πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά η ακεραιότητα της συσκευασίας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του εμφυτεύματος αν η συσκευασία έχει υποστεί βλάβη, έχει ανοιχθεί ή υγρανθεί. Η εσωτερική συσκευασία πρέπει να ανοίγεται λίγο πριν την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και να αγγίζεται μόνο με αποστειρωμένα γάντια και αποστειρωμένα εργαλεία.
- Πριν από τη χρήση των εμφυτευμάτων πλέγματος TiLENE® ο ιατρός πρέπει να ελέγξει το μέγεθος του στομίου της κήλης και να επιβεβαιώσει ότι η αλληλοεπικάλυψη επαρκεί.

Προτεινόμενη διαδικασία εμφύτευσης

Στην περίπτωση έμμεσης βουβωνικής κήλης διαχωρίζεται ο κηλικός σάκκος μετά την εκτομή και απολίνωση. Για ένα ιδανικό αποτέλεσμα επιλέξτε το σωστό μέγεθος του TiLENE® Plug. Στην περίπτωση που είναι απαραίτητο, μειώστε την εσωτερική επιφάνεια του TiLENE® Plug, εάν σε περίπτωση μικρότερων ζημιών χρειαστεί λιγότερο υλικό δικτύου. Πιάστε την εσωτερική επιφάνεια του TiLENE® Plug με μία αποστειρωμένη λαβίδα ή τοιμπίδα και πιέστε το Plug προσεκτικά μέσω του εσωτερικού βουβωνικού δακτυλίου βαθιά στον προπεριτοναϊκό χώρο. Αφού έχετε τοποθετήσει το Plug, στερεώστε την εξωτερική θέση του Plugs με 2-4 ραφές.

Συμπληρωματικά τοποθετείται το TiLENE® Onlay-Patch στην εμπρόσθια πλευρά του οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού σωλήνα. Το άνοιγμα του δικτύου τοποθετείται γύρω από τον σπερματικό τόνο, για να τροφοδοτηθεί μία συμπληρωματικά υπάρχουσα άμεση βουβωνική κήλη και/ή να ενισχύσει τον ιστό, για την πρόληψη της επανεμφάνισης μίας άμεσης ή έμμεσης βουβωνικής κήλης.


Αντενδείξεις

Για τη χρήση Για τη χρήση των δικτυωτών εμφυτευμάτων TiLENE® ισχύουν όλες οι γνωστές και επίκαιρες αντενδείξεις και κανόνες για τα εμφυτεύματα από μαλακό ύφασμα. Εδώ ανήκουν μεταξύ άλλων:


- Ασθενείς στη φάση της ανάπτυξης (η γνωστή ελαστικότητα αυτών των ενισχύσεων μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής για την ανάπτυξη των παιδιών).
- Επεμβάσεις σε μολυσμένα σημεία ή σημεία με φλεγμονή.

Instrukcja Używania

TiLENE® Plug Set

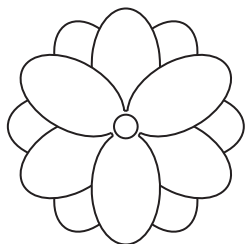

TiLENE® Plug

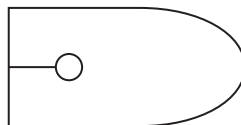

TiLENE® Onlay-Patch

Opis

Protetyczna, dziana nieresorbowalna monofilamentowa siatka polipropylenowa pokryta powłoką tytanową. Siatka ma określone parametry odnośnie wytrzymałości i rozciągania optymalnie w stosunku do dynamiki tkanek organizmu ludzkiego. Oferta obejmuje implanty siatkowe o różnej masie powierzchniowej, kształtach i rozmiarach dostosowanych do natury rekonstrukcji.

TiLENE® Plug Set składa się z TiLENE® Plug i TiLENE® Onlay-Patch.

Ta instrukcja użytku obowiązuje także dla wariantu produktu TiLENE® Plug Set.

Wskazania

Chirurgiczne implanty siatkowe wykonane z włókien polipropylenowych posiadają powłokę tytanową i przeznaczone są do zaopatrzenia ubytków tkanki miękkiej.

TiLENE® Plug Set służy zaopatrywaniu (leczeniu) przepuklin pachwinowych.

Sposób działania

Implanty służą do wzmocnienia tkanki lub uzupełniania ubytków tkanki miękkiej. Gromadzenie się cienkiej włóknistej tkanki, której komórki przerastają przez oczka siatki, powoduje, że siatka zostaje całkowicie zespolona z tkanką ciała. Badania eksperymentalne wykazały, że implant pozostaje przy tym miękki i elastyczny.

Ostrzeżenia

- ☞ Przy zaopatrywaniu defektów tkanek miękkich za pomocą implantów siatkowych TiLENE® mogą pojawić się następujące powikłania: wylewy surowicze, krwawe, nawroty, infekcje, zrosty, przemieszczanie siatki oraz przetoki.
- ☞ Pomimo, iż infekcje nie mają wpływu na siatkę, to przy wszczepianiu niewchłanialnego materiału w zakażoną lub zabrudzoną ranę istnieje ryzyko powstania przetok i/lub przemieszczania się siatki.
- ☞ Powłoka tytanowa może uczulać osoby reagujące alergicznie na tytan.
- ☞ Powłoka tytanowa w materiale nie wpływa na diagnostykę radiologiczną (rentgen, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badanie ultrasonograficzne).
- ☞ Nie stosuj produktu, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, jeżeli masz wątpliwości co do sterylności, lub jeżeli upłynął termin przydatności do użycia.
- ☞ Każdy produkt jest indywidualnie zapakowany; produkty są dostarczane wysterylizowane tlenkiem etylenu i bez pirogenu. Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie, nie preparować, nie sterylizować. Ponowne stosowanie, preparowanie lub ponowna sterylizacja produktów jednorazowych może spowodować zmniejszenie ich wydajności lub utratę funkcjonalności. Ponowne stosowanie produktów jednorazowych może spowodować ekspozycję na drobnoustroje chorobotwórcze jak wirusy, bakterie, grzyby lub priony.
- ☞ Uszkodzonych implantów nie wolno stosować. Upewnij się, że ostre przedmioty nie uszkodziły siatki bardziej, niż jest to normalne w trakcie operacji.

Środki ostrożności

- Przy szerokich rozwarstwieniach i dużych zmianach tkankowych zaleca się dokładnie skontrolować hemostazę i unikać pozostawiania pustych przestrzeni, ażeby ułatwić szybką integrację pomiędzy przepukliną a zastosowanym wzmocnieniem.
- Produkt może być wszczepiany wyłącznie przez lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie technik chirurgicznych. Odpowiedzialność za implantację ponosi chirurg.
- Celem uniknięcia zapaleń wywołanych przez ciało obce np. talk, przy pracy z implantem nie należy używać rękawic pudrowanych.
- Implantaty są dostarczane w podwójnym sterylnym opakowaniu. Przed użyciem należy sprawdzić opakowanie na brak uszkodzeń, a w razie jego uszkodzenia, otwarcia lub zawilgocenia nie wolno pod żadnym pozorem użyć implantatu. Opakowanie wewnętrzne powinno być otwarte dopiero przed wszczepianiem. Należy pracować wyłącznie w wyjałowionych rękawicach oraz używać wyjałowionych instrumentów.
- Przed zastosowaniem implantów siatkowych TiLENE® operator powinien skontrolować wielkość wrót przepukliny i zapewnić dostateczne zachodzenie siatki na obszar sąsiedni.

Zalecana procedura implantacji

W przypadku pośrednich przepuklin pachwinowych worków przepuklinowych po preparacji i podwiązku usuwa się. Aby uzyskać optymalny efekt, należy wybrać właściwy rozmiar TiLENE® Plug. Jeżeli w przypadku mniejszych defektów potrzeba mniej materiału, należy skrócić wewnętrzną warstwę TiLENE® Plug. Ująć wewnętrzną warstwę implantu TiLENE® Plug sterylnymi szczypcami lub klamrami i wetknąć ostrożnie utworzony czop przez wewnętrzną pierścień pachwinowy głęboko do przestrzeni przedotrzewnowej. Po usytuowaniu czopa przymocować jego zewnętrzną warstwę 2-4 szwami.

Dodatkowo TiLENE® Onlay-Patch umieszcza się od przodu tylnej ściany kanału pachwinowego. Otwór siatki umieszcza się wokół nasieniowodu, aby zabezpieczyć dodatkowo istniejącą bezpośrednią przepuklinę pachwinową i/lub wzmocnić tkankę dla zapobieżenia nawrotowi bezpośredniej lub pośredniej przepukliny pachwinowej.


Przeciwwskazania

Stosując implanty siatkowe TiLENE® należy uwzględnić wszystkie ogólnie znane przeciwwskazania oraz reguły odnośnie implantów tkanek miękkich. Wskazówki te dotyczą między innymi:


- pacjentów w okresie wzrostu (z uwagi na rozwój dziecka, podawana rozciągliwość wzmocnienia może okazać się niedostateczna).
- wszczepień w miejscach zabrudzonych lub z odczynem zapalnym.

Návod k použití

TiLENE® Plug Set

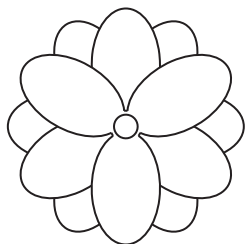

TiLENE® Plug

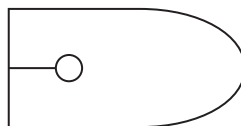

TiLENE® Onlay-Patch

Popis

Nevstřebatelná protetická pletenina s velkými póry z jednovláknové polypropylenové příze obalené titanovou vrstvou. Pletenina má pevnost a roztažnost optimálně přizpůsobenou dynamice tělní tkáně. Perforované implantáty jsou k dispozici v různých základních hmotnostech a rozměrech.

TiLENE® Plug Set se skládá z TiLENE® Plug a TiLENE® Onlay-Patch.

Tento návod k použití platí také pro varianty výrobků TiLENE® Plug Set.

Indikace

Chirurgické perforované implantáty z polypropylénu pokrytého vrstvou titanu se používají při léčbě defektů měkkých tkání. TiLENE® Plug Set jsou k ošetření tříselné kýly.

Způsob účinku

Účelem implantátu je zesílit tkáň anebo přemostit defekt v měkkých tkáních. Při použití perforovaného materiálu dojde k adsorpci tenké vrstvy fibrózní tkáně na tento materiál, buňky fibrózní tkáně následně prorostou skrz póry materiálu a implantát se tak stane součástí pacientových tkání. Experimentální výzkumy prokázaly, že implantát zůstane i nadále jemný a ohebný.

Upozornění

- ❗ Při ošetření defektů měkkých tkání pomocí síťových implantátů TiLENE® mohou nastat tyto komplikace: Sero-my, hematomy, recidiva, infekce, viscerální srůstání, migrace meshe a tvorba píštělí.
- ❗ I když infekce nemají žádný vliv na perforovaný materiál, musí se při použití nevstřebatelného perforovaného materiálu v infikované nebo kontaminované ráně vždy počítat s rizikem vzniku píštěle a/nebo s rejekcí implantátu.
- ❗ V případě alergie na titan může dojít k rejekci implantátu, která je zapříčiněna povrchovou titanovou vrstvou.
- ❗ Titanová vrstva, která se nachází na syntetickém materiálu, neovlivní žádné radiodiagnostické postupy (rentgenování, CT, MRT a sonografického vyšetření).
- ❗ Pokud je obal otevřený nebo poškozený, nebo pokud máte pochybnosti ohledně sterility, respektive pokud vypršelo datum použití, výrobek nepoužívejte.
- ❗ Každý výrobek je zabalen jednotlivě, je EO sterilizován a dodáván bez obsahu pyrogenů. Je určen k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně, opakovaně neupravujte, ani opakovaně nesterilizujte. Opakované použití, opakovaná úprava nebo opakovaná sterilizace jednorázových výrobků může vést ke snížení jejich výkonnosti a ztrátě funkčnosti. Kvůli opakovanému použití jednorázových výrobků může dojít k vystavení choroboplodným zárodkům jako jsou viry, bakterie, plísňe nebo priony.
- ❗ Poškozené implantáty se nesmí používat. Zajistěte, aby ostré předměty nepoškodily síťovinu mimo běžnou klinickou aplikaci během operace.

Bezpečnostní opatření

- V případě disekcí a velkého rozsahu oddělené tkáně doporučujeme pečlivě vyzkoušet provedení hemostázy a maximálně potlačit zbývající dutiny tak, aby bylo možné usnadnit rychlou integraci zesílení hernií.
- Tento výrobek smí používat pouze lékaři, kteří jsou dobře obeznámeni s chirurgickými technikami tohoto typu. Odpovědnost za implantaci leží na chirurgovi.
- S implantátem se smí manipulovat pouze v rukavicích bez pudru, aby se předešlo eventuálnímu zánětu způsobenému cizími částicemi, jako je například talek.
- Implantáty jsou sterilně balené ve dvouvrstevném obalu. Před použitím obal důkladně přezkoumáte, zda není poškozený. Implantát nikdy nepoužívejte, pokud je obal poškozený, otevřený anebo vlhký. Vnitřní obal se smí otevřít pouze bezprostředně před implantací a smí se s ním manipulovat pouze ve sterilních rukavicích a pomocí sterilních nástrojů.
- Před použitím velmi lehkého síťových implantátů TiLENE® musí lékař posoudit velikost herniální branky a zajistit jej dostatečně překrytí.

Doporučený postup při implantaci

U nepřímých tříselných kýl se kýlní vak po preparaci a ligatuře oddělí. Pro dosažení optimálního výsledku zvolte správnou velikost TiLENE® Plug. Jestliže je v případě menšího defektu zapotřebí méně síťového materiálu, zkrátte vnitřní vrstvu TiLENE® Plug. Uchopte vnitřní vrstvu TiLENE® Plug sterilními kleštěmi nebo svorkou a opatrně zátku zatlačte vnitřním tříselným prstencem hluboko do preperitoneálního prostoru. Po uložení zátky připevněte vnější vrstvu zátky 2-4 stehy.

Dodatečně se na přední stranu zadní stěny tříselného kanálu umístí TiLENE® Onlay-Patch. Otvor sítky se umístí kolem semenného provazce, aby bylo možné navíc případně ošetřit přímou tříselnou kýlu a/nebo posílit tkáň za účelem zabránění vzniku přímé nebo nepřímé tříselné kýly.


Kontraindikace

K použití implantátů síťové implantáty TiLENE® se vztahují všechny známé standardní kontraindikace a pravidla týkající se implantátů pro měkké tkáně. Zahrnují následující:


- Pacienti v období růstu (pro růst dětí může být známá roztažitelnost tohoto zesílení nedostatečná).
- Operace v kontaminované nebo zanícené oblasti.

Návod na použitie

TiLENE® Plug Set

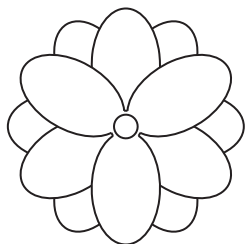

TiLENE® Plug

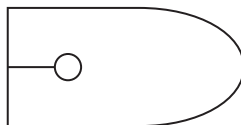

TiLENE® Onlay-Patch

Popis

Nevstrebateľná protetická pletenina s veľkými pórmí z jednovláknovej polypropylénovej priadze obalenej titánovou vrstvou. Pletenina má pevnosť a rozťažnosť optimálne prispôbenú dynamike telového tkaniva. Perforované implantáty sú k dispozícii v rôznych základných hmotnostiach a rozmeroch.

TiLENE® Plug Set sa skladá z TiLENE® Plug a TiLENE® Onlay-Patch.

Tento návod na použitie platí aj pre varianty výrobkov TiLENE® Plug Set.

Indikácia

Chirurgické perforované implantáty z polypropylénu pokrytého vrstvou titánu sa používajú pri liečbe defektov mäkkých tkanív. TiLENE® Plug Set slúži na ošetrovanie slabínovej prietrže.

Spôsob účinku

Účelom implantátu je zosilniť tkanivo alebo premostiť defekt v mäkkých tkanivách. Pri použití perforovaného materiálu dôjde k adsorpcii tenkej vrstvy fibrózneho tkaniva na tento materiál, bunky fibrózneho tkaniva následne prerastú skrz póry materiálu a implantát sa tak stane súčasťou pacientových tkanív. Experimentálne výskumy preukázali, že implantát zostane i naďalej jemný a ohybný.

Upozornenie

- ☞ Pri ošetrovaní defektov mäkkých tkanív pomocou sieťových implantátov TiLENE® môžu nastať tieto komplikácie: serómy, hematómy, recidíva, infekcie, viscerálne zvrasty, migrácia sieťky a tvorba píšťal.
- ☞ I keď infekcie nemajú žiadny vplyv na perforovaný materiál, musí sa pri použití nevstrebateľného perforovaného materiálu v infikovanej alebo kontaminovanej rane vždy počítať s rizikom vzniku fistule a/alebo s extrúziou implantátu.
- ☞ V prípade alergie na titán môže dôjsť k extrúzii implantátu, ktorá je zapríčinená povrchovou titánovou vrstvou.
- ☞ Titánová vrstva, ktorá sa nachádza na syntetickom materiáli, neovplyvní žiadne rádiologické postupy (RTG, CT, MRT a sonografické vyšetrenia).
- ☞ Nepoužívajte výrobok, ak je obal otvorený alebo poškodený, alebo ak máte pochybnosti o sterilite, resp. ak uplynula doba použiteľnosti.
- ☞ Každý výrobok je zabalený samostatne a dodáva sa sterilizovaný etylénoxidom a bez pyrogénov. Je určený na jednorazové použitie. Nepoužívajte znovu, neupravujte znovu ani znovu nesterilizujte. Opätovné použitie, opätovná príprava alebo opätovná sterilizácia jednorazových výrobkov môže mať za následok znížený výkon alebo stratu ich funkčnosti. Pri opätovnom použití jednorazových výrobkov môžu byť výrobky vystavené choroboplodným zárodkom, ako sú napr. vírusy, baktérie, plesne alebo príony.
- ☞ Poškodené implantáty sa nesmú používať. Zabezpečte, aby ostré predmety neprišli do kontaktu s pletivom okrem bežnej klinickej aplikácie počas operácie.

Bezpečnostné opatrenia

- V prípade disekcií a veľkého rozsahu oddeleného tkaniva odporúčame dôkladne vyskúšať vykonanie hemostázy a maximálne potlačiť zvyšné dutiny tak, aby bolo možné zjednodušiť rýchlu integráciu zosilnenia hernií.
- Tento výrobok smú používať len lekári, ktorí sú dobre oboznámení s chirurgickými technikami tohto typu. Zodpovednosť za implantáciu leží na chirurgovi.
- S implantátom sa môže manipulovať len v rukaviciach bez púderu, aby sa predišlo eventuálnemu zápalu spôsobenému cudzími časticami, ako je napríklad talkum.
- Implantáty sú sterilne balené v dvojvrstvovom obale. Pred použitím obal dôkladne prekontrolujte, či nie je poškodený. Implantát nikdy nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený, otvorený alebo vlhký. Vnútorňý obal sa môže otvoríť len bezprostredne pred implantáciou a môže sa s ním manipulovať len v sterilných rukaviciach a pomocou sterilných nástrojov.
- Pred použitím veľmi ľahkého sieťových implantátov TiLENE® musí lekár posúdiť veľkosť herniálnej branky a zaistiť jej dostatočné prekrytie.

Odporúčaný postup pri implantácii

V prípade nepriamych trieslových hernií sa herniuový vak po preparácii a ligatúre oddelí. Pre optimálny výsledok zvolte správnu veľkosť TiLENE® Plug. Ak je to potrebné, skráťte vnútornú vrstvu TiLENE® Plug, ak pri menších defektoch bude potrebné menšie množstvo sieťového materiálu. Vnútorňú vrstvu TiLENE® Plug chyťte pomocou sterilných klieští alebo svoriek a zatlačte zátku opatrne cez vnútorný trieslový prstenec hlboko do preperitoneálneho priestoru. Potom, čo ste polohovali zátku, upevnite vonkajšiu vrstvu zátky pomocou 2-4 stehov.

Navyše sa TiLENE® Onlay-Patch umiestni na prednej strane zadnej steny inguinálneho kanála. Otvor sieťky sa umiestni okolo semenného povrazca, aby bolo možné ošetriť dodatočne existujúcu priamu trieslovú herniu a/alebo zosilniť tkanivo, aby sa zabránilo opätovnému výskytu priamych alebo nepriamych trieslových hernií.


Kontraindikácia

K použitiu implantátov sieťových implantátov TiLENE® sa vzťahujú všetky známe štandardné kontraindikácie a pravidlá týkajúce sa implantátov pre mäkké tkanivá. Zahrňujú nasledujúce:


- Pacienti v období rastu (pre rast detí môže byť známa rozťažiteľnosť tohto spevnenia nedostatočná).
- Operácie v kontaminovanej alebo zapálenej oblasti.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

TiLENE® Plug Set

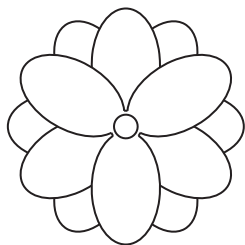

TiLENE® Plug

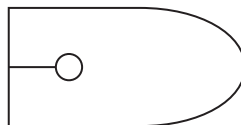

TiLENE® Onlay-Patch

Описание

Крупнопористая, нерассасывающаяся протетическая сетка, плетеная из полипропиленовых мононитей с титансодержащим покрытием. По своей разрывной прочности и растяжимости она оптимально соответствует динамике телесных тканей. Имеются сетчатые имплантаты с различной массой на единицу площади, с заданной формой и размерами.

Комплект TiLENE® Plug Set состоит из вкладыша TiLENE® Plug и наружного лоскута TiLENE® Onlay-Patch.

Настоящая инструкция по применению также действительна для всей линейки продуктов TiLENE® Plug Set.

Показания

Хирургические сетчатые имплантаты из титанированного полипропиленового трикотажа предназначены для обработки дефектов мягких тканей.

TiLENE® Plug Set используется для лечения паховых грыж.

Принцип действия

Имплантаты обеспечивают укрепление ткани и перекрытие дефектов мягких тканей. Благодаря наслоению тонкого фиброзного слоя ткани и прорастанию клеток ткани сквозь поры трикотажа сетчатый материал полностью закрывается аутогенной тканью. Экспериментальные исследования показали, что имплантат при этом остается мягким и гибким.

Предупреждения

- ❗ При лечении дефектов мягких тканей с помощью сетчатых имплантатов TiLENE® возможны следующие осложнения: серомы, гематомы, рецидивы, инфекции, висцеральные спайки, миграция сетки и образование фистул.
- ❗ Хотя инфекции и не имеют воздействия на сетчатый материал, при использовании нерассасывающегося сетчатого материала в инфицированной или зараженной ране всегда имеется риск образования свища и/или выдавливания сетки из раны.
- ❗ В случае аллергии на титан возможна реакция на инородное тело, вызванная титаносодержащим покрытием.
- ❗ Титаносодержащее покрытие пластмассы не влияет на радиологические методы диагностики (рентгенологическое исследование, компьютерная томография, магнитнорезонансная томография и УЗИ).
- ❗ Не используйте продукт, если упаковка открыта или повреждена или при наличии сомнений в стерильности, а также по истечении срока годности.
- ❗ Каждый продукт находится в индивидуальной упаковке, простерилизован этиленоксидом и не содержит пиогенов. Предназначен для одноразового использования. Не использовать, не обрабатывать и не стерилизовать повторно. В результате повторного использования, обработки или рестерилизации одноразовых продуктов возможно снижение их эффективности или потеря функциональности. В результате повторного использования одноразовых продуктов возможен контакт с возбудителями заболеваний, такими как вирусы, бактерии, грибки или прионы.
- ❗ Не используйте поврежденные имплантаты. Убедитесь, что во время операции на сетку не оказываются воздействия острыми предметами, выходящего за рамки обычного клинического применения.

Меры предосторожности

- При широком рассечении и больших отслоениях тканей рекомендуется тщательно контролировать гемостаз и по возможности не допускать остающихся полостей, чтобы облегчить быструю интеграцию укрепления грыжи.
- Этот продукт должен использоваться только врачами, знакомыми с техникой соответствующих хирургических вмешательств. Имплантация проводится под ответственность хирурга.
- Во избежание воздействия инородных частиц, способствующих развитию воспалений, как напр., талка, за имплантат нужно браться только в перчатках без талка.
- Имплантаты стерильно упакованы в двойную упаковку. Перед использованием следует тщательно проверить целостность упаковки. Ни в коем случае не используйте имплантат в случае поврежденной, вскрытой или промокшей упаковки. Внутреннюю упаковку следует вскрывать лишь перед использованием имплантата, и брать ее можно исключительно в стерильных перчатках и стерильными инструментами.
- Прежде чем наложить грыжевую сетку сетчатых имплантатов TiLENE® хирург должен определить размер грыжевых ворот и обратить внимание на достаточное их перекрытие.

Рекомендованный метод имплантации

В случае непрямой паховой грыжи грыжевой мешок подвергается препарации и лигатуре и отделяется. Для оптимального результата важно выбрать правильный размер obturator TiLENE® Plug. При необходимости укоротите внутренний слой obturator TiLENE® Plug, если обрабатывается незначительный дефект, требующий меньше сетчатого материала. Возьмите внутренний слой obturator TiLENE® Plug стерильным захватом или зажимом и аккуратно введите obturator через внутреннее паховое кольцо вглубь предбрюшинного пространства. После того как obturator займет нужное положение, зафиксируйте его наружный слой 2-4 швами.

Дополнительно на переднюю сторону задней стенки пахового канала накладывается «заплата» TiLENE® Onlay-Patch. Отверстие сетки располагается вокруг семенного канатика, для того чтобы обеспечить лечение имеющейся прямой паховой грыжи и/или усилить ткань в целях профилактики прямых или непрямых паховых грыж.


Противопоказания

При использовании сетчатых имплантатов TiLENE® силу имеют все известные обычные противопоказания и правила, действующие для имплантатов мягких тканей. Сюда, в частности, относятся:


- пациенты в фазе роста (растяжимости материала может оказаться недостаточной для роста детей).
- операции на зараженном или воспаленном месте.

Uputstvo za upotrebu

TiLENE® Plug Set

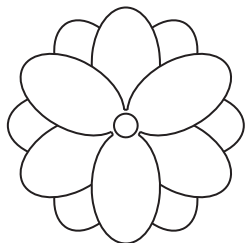

TiLENE® Plug

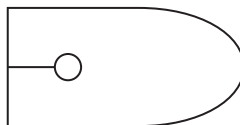

TiLENE® Onlay-Patch

Opis

Neresorbujuća protetska pletena platna sa velikim porama, izrađena od monofilnog polipropilenskog konca obloženog slojem od titana. Pleteno platno je u pogledu otpornosti na cepanje i istezanje optimalno prilagođeno dinamici telesnih tkiva. Mrežni implantati se mogu nabaviti u raznim površinskim težinama sa definisanim oblicima i dimenzijama.

TiLENE® Plug Set sastoji se od jednog TiLENE® Plug i od jednog TiLENE® Onlay-Patch.

Ovo uputstvo za upotrebu važi i za varijante proizvoda od TiLENE® Plug Set.

Indikacije

Hirurški mrežni implantati od titaniziranog polipropilenskog pletiva služe za zbrinjavanje deformacija mekog tkiva.

TiLENE® Plug Set služi za zbrinjavanje preponske kile (hernia inguinalis).

Način rada

Implantati služe za ojačavanje mekog tkiva ili za premošćivanje pri deformacijama mekog tkiva. Taloženjem tankog vlaknastog sloja tkiva, čije ćelije rastu kroz pore pletiva, mrežasti materijal se kompletno omotava telesnim tkivom. Eksperimentalna istraživanja su pokazala, da pri tome implantati ostaju meki i fleksibilni.

Upozorenja

- ❗ Pri zbrinjavanju deformacija mekog tkiva sa TiLENE® mrežnim implantatima moguće su sledeće komplikacije: Seromi, hematomi, recidivi, infekcije, visceralno zarastanje, migracija mrežice i stvaranje fistula.
- ❗ Mada infekcija nema uticaj na mrežasti materijal, upotreba neresorbujućeg mrežastog materijala u inficiranim ili kontaminiranim ranama uvek stvara rizik od nastanka fistula i/ili istiskivanja mrežice.
- ❗ U slučaju alergije na titan mogući je reakcija na strano telo, izazvana titanskim omotačem.
- ❗ Uticaj radioloških dijagnostičkih metoda (rendgenski, CT, MRT i ultrazvučni pregledi) zbog titanskog omota na veštackom materijalu nije izražen.
- ❗ Ne upotrebljavajte proizvod ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno ili ako postoji sumnja u pogledu sterilnosti, odnosno ako je datum upotrebe prošao.
- ❗ Svaki proizvod je upakovan pojedinačno i sterilisan etilen oksidom i nezapaljiv je. Proizvod je predviđen za jednokratnu upotrebu. Ne upotrebljavati ponovo, ponovo pripremati ili sterilizirati. Za jednokratnu upotrebu, ponovna upotreba, ponovna priprema ili sterilizacija jednokratnog proizvoda mogu da smanje efikasnost proizvoda ili da dovedu do potpune neispravnosti. Ponovnom upotrebom jednokratnog proizvoda moguće je izlaganje izazivačima bolesti, kao što su virusi, bakterije, gljivice ili prioni.
- ❗ Oštećeni implantati se ne smeju ponovo koristiti. Postarajte se da oštri predmeti ne pritiskaju mrežu više nego što je to uobičajeno tokom operacije.

Mere opreza

- Kod širokih disekcija i većih gubitaka tkiva preporučuje se, da se pažljivo ispita hemostaza i što više umanjiti preostala šupljina kako bi se olakšala integracija ojačanja hernije.
- Ovaj proizvod mogu ugrađivati samo lekari, koji su obučeni što se tiče ove hirurške tehnike. Implantacija se vrši na odgovornost hirurga.
- Da bi se sprečilo dejstvo stranih predmeta koje pospešuje upalne procese, kao na primer talka, potrebno je da se implantanti hvataju samo sa nenapuderisanim rukavicama.
- Implantati su upakovani u sterilnom duplom pakovanju. Pre ugradnje pažljivo prekontrolisati ispravnost pakovanja. Ni slučajno ne koristiti implantate kod pakovanja koja su oštećena, otvorena ili procurela. Unutrašnje pakovanje treba otvoriti neposredno pre ugradnje implantata i raditi isključivo sa sterilnim rukavicama i sterilnim instrumentima.
- Pre ugradnje TiLENE® mrežnih implantata lekar treba da prekontroliše veličinu otvora kile i da obrati pažnju da li mrežica dovoljno prelazi rubove kile.

Preporučeni postupak implantacije

U slučaju indirektnih preponske hernije, kesa hernije se uklanja nakon operacije i ligature. Za postizanje optimalnog rezultata, odaberite pravu veličinu TiLENE® Plug. U slučaju potrebe, skratite unutrašnji sloj na TiLENE® Plug, dok je pri manjim deformacijama potrebno manje mrežastog materijala. Uхватite unutrašnji sloj TiLENE® Plug sa sterilnom pincetom ili spajalicom i kroz unutrašnji prsten pažljivo natisnite zapušač duboko u prostanstvo koje se nalazi ispred stomaka. Nakon što ste namestili na odgovarajuće mesto zapušač, pričvrstite spoljašnji sloj zapušača sa 2-4 šava.

Na prednjoj strani zadnjeg zida preponskog kanala dodatno se postavlja TiLENE® Onlay-Patch. Otvor na mreži se nalazi oko spermatozoida, da bi se dodatno fiksirala postojeća direktna preponska hernija i/ili da se ojača tkivo, i time da se spreči pojava sledeće direktne ili indirektno preponske hernije.

Kontra indikacije

Za ugradnju TiLENE® mrežnih implantata važe sve poznate uobičajene kontra indikacije i propisi za implantate mekih tkiva. Ovdje spadaju između ostalih:

- Pacijenti u periodu rasta (poznata rastegljivost ovog ojačanja se za decu u periodu rasta može pokazati kao nedovoljna).
- Zahvati na kontaminiranom mestu ili mestu pod upalom.



pfmmedical

pfm medical titanium gmbh
Südwestpark 42
90449 Nürnberg, Germany
T +49 (0)2236 9641-0, F +49 (0)2236 9641-20
service@pfmmedical.com
www.pfmmedical.com



(01) 0 4042301 18183 1 (10) 2016-11



MK-A000593_09 / 2016-11-02